

**IKP - IAP - ESP**

**CONICAL CONNECTION 12°**

# company profile



**RESISTA**<sup>®</sup>

Marchio di proprietà della **Ing. Carlo Alberto ISSOGLIO & C. S.r.l.** identifica l'intera gamma di prodotti concepiti dall'azienda per soddisfare le esigenze di odontoiatri ed odontotecnici.

since 1946

**RESISTA è sinonimo di garanzia, equilibrio e continuità, noto in tutto il mondo.**



**RESISTA**, trademark owned by Ing. Carlo Alberto Issoglio & C. S.r.l. , identifies the full range of products designed by the company to meet the needs of dentists and dental technicians.

**RESISTA is known all over the world since 1946, and synonymous of guarantee, balance and continuity.**

# company profile

L'azienda dispone di un complesso produttivo per la realizzazione di dispositivi medici, tra i più moderni del settore, situato ad Omegna, una bellissima cittadina che si affaccia sul Lago d'Orta.

Con impegno, vanto ed orgoglio, il personale tecnico e scientifico del reparto Ricerca & Sviluppo è quotidianamente dedicato a promuovere l'innovazione ed il miglioramento dei nostri prodotti e processi.



Negli anni, il marchio **RESISTA** è diventato anche sinonimo di risposta rapida e qualitativa ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dell'odontoiatria moderna.

Qualità, Prezzo e Servizio riassumono in tre semplici parole la percezione quotidiana degli utilizzatori dei prodotti marchiati **RESISTA**.



The company has one of the most ip-to-date manufacturing site for the medical devices, located in Omegna, a beautiful town on Orta Lake, Italy.

With commitment, merit and pride, the technical and scientific staff of the R&D department is daily involved to promote innovation and the improvement of our products and processes.

Over the years, the **RESISTA** brand has also become synonymous of fast and qualitative response to market changes and the needs of modern dentistry.

Quality, Price and Service summarize in three simple words the daily perception of the users of **RESISTA** branded products.

# the choice

**RICERCA & SVILUPPO** - Il programma R&D di Resista Group nasce dalle indicazioni provenienti dal mondo clinico unite alla nostra esperienza maturata nel campo dei dispositivi medici impiantabili.

Con l'utilizzo di programmi di modellazione 3D e sofisticati sistemi computerizzati simuliamo le geometrie finali ed il design, sviluppando le fasi di prototipizzazione rapida dei progetti.



**INNOVAZIONI** - Resista Group è strutturata per soddisfare tutte le esigenze del metal-implant con una avanzata tecnologia di concezione, prototipizzazione ed ingegnerizzazione finale del prodotto per arrivare a soluzioni innovative.

La validazione viene eseguita in collaborazione con Istituti di Ricerca accreditati in conformità ai requisiti degli Standard Internazionali.



**RESEARCH & DEVELOPMENT** - The R&D Resista Group's program stems from indications from the clinical world combined with our experience in the field of implantable medical devices.

Due to the use of 3D modeling programs and sophisticated computer systems, we simulate the final geometries and the design, developing the rapid prototyping phases of the projects.

**INNOVATIONS** - Resista Group is structured to meet all the needs of the metal-implant with an advanced conception technology, prototyping and final product engineering to arrive at innovative solutions. Validation is carried out in collaboration with accredited Research Institutes following the International Standards Requirements.

# the choice

**QUALITÀ DI PROGETTO E PROCESSO** - ICIM Spa ha certificato la **Ing. C. A. Issoglio & C. S.r.l.** in accordo alle normative **UNI EN ISO 9001** e **UNI EN ISO 13485** nel rispetto di tutte le normative vigenti relative ai prodotti e servizi offerti.

Ogni dipendente che ricopre differenti ruoli (tecnici, ingegneristici, amministrativi, commerciali, operatori meccanici, ecc), segue linee guida ed obiettivi per un unico fine: il miglioramento continuo.



**OBIETTIVO PRINCIPALE** - La soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo. Il fattore vincente è la capacità dell'azienda a risolvere nel breve qualsiasi tipo di richiesta.

Il supporto tecnico fornito dagli specialisti di prodotto, la disponibilità, l'efficienza e la cordialità sono il punto di forza della nostra struttura.



**PROJECT AND PROCESS QUALITY** - ICIM Spa certified **Ing. C. A. Issoglio & C. S.r.l.** in accordance with **UNI EN ISO 9001** and **UNI EN ISO 13485** in compliance with all current regulations relating to the products and services offered. Every employee covering different roles (technical, engineering, administrative, commercial, mechanic operators, etc.), follows guidelines and objectives for a single purpose: continuous product improvement.

**MAIN OBJECTIVE** - Customer satisfaction is our objective. The winning factor is the company's ability to quickly resolve any type of request. The technical support provided by Product Specialists, availability, efficiency and friendliness are the strengths of our structure.

# the project

**CONCETTI BIOMECCANICI** - Il successo della metodica implantare **Resista Group** è frutto di approfonditi studi sul design dei prodotti e sulla tecnologia di produzione. I risultati clinici a lungo termine sono, infatti, fortemente influenzati dalla precisione e dalla qualità.

Il **processo produttivo** viene eseguito da operatori altamente qualificati che, con l'ausilio dei sistemi elettronici CNC automatizzati, riescono ad ottenere risultati ottimali e riproducibili.



Le tolleranze di lavorazione, soprattutto negli **accoppiamenti protesici**, sono il nostro **gold standard** e vengono confinate tra i **7 - 10  $\mu\text{m}$** .

**MATERIALI** - Gli impianti sono realizzati in **Titanio ASTM Gr 4** (Norm. ISO 5832/2), le viti di ritenzione e le componenti protesiche sono realizzate in **Legna di Titanio ASTM Gr 5** (Norm. ISO 5832/3).



**BIOMECHANICAL CONCEPTS** - The **Resista Group** method success is the result of several product design studies and the high technology applied in the production. The precision and reliability of the implant has a strong influence on the long term clinical success.


**The manufacturing process** is carried out by high qualified operators, skilled enough to obtain optimal and reproducible results with the use of electronically controlled CNC machinery. The machinery tolerances, especially in **prosthetic connections**, are our **gold standard** and are between **7 - 10  $\mu\text{m}$** .

**MATERIALS** - The implants are made of Titanium ASTM Gr. 4 (ISO Standard 5832/2) and the screws and prosthetic components are made of Titanium ASTM Gr. 5 (ISO Standard 5832/3).

# the project

**TRATTAMENTI DI SUPERFICIE** - Il processo di micro-sottrazione non contaminata, doppia acidificazione **DAE** (Double Acid Etching), modifica la micro rugosità degli impianti (**Ra, Rq**) texturizzando la superficie e massimizzando la bagnabilità ed il biomimetismo.

Il trattamento di superficie ed il processo di decontaminazione, brevettati da **Nobil Bio Ricerche**, sono in grado di migliorare le proprietà bio-chimiche degli impianti dentali **Resista**.

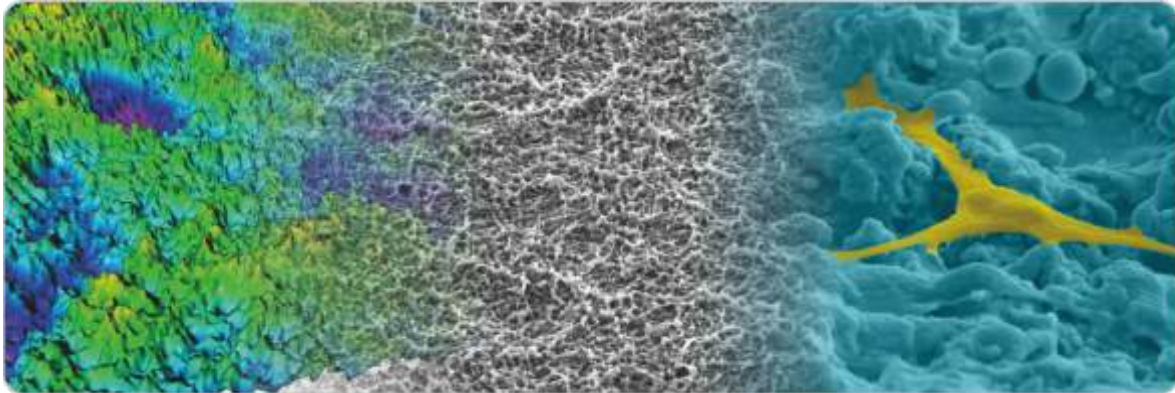

**SISTEMA QUALITÀ** - L'azienda è certificata in accordo alle norme **UNI EN ISO 9001** e **UNI EN ISO 13485** e ha ottenuto la marcatura **CE** sui propri dispositivi medici in accordo alla Direttiva Europea 93/42/CEE e ss.mm.ii. nel rispetto delle armonizzate di riferimento.

L'impegno è costante nel mantenimento della conformità.




**SURFACE TREATMENTS** - The non-contaminant micro-subtraction process, **DAE** (Double Acid Etching), changes the implant micro roughness (**Ra, Rq**) and the surface texture maximizing the wettability and biomimetic properties. The new surface treatment and decontamination process are patented by **Nobil Bio Ricerche** improving the bio-chemical properties of the implants.





**QUALITY SYSTEM (QS)** - **UNI EN ISO 9001** and **UNI EN ISO 13485** in compliance of Medical Devices Directives. We are qualified in the design and in the production management of dental implants, dental prosthesis, intraligamental anesthesia syringes and abrasive discs.

# tooth - implant ratio

## Resistenza Meccanica Implantare ed Indicazioni d'uso Implants Mechanical Resistance and Indications for Use

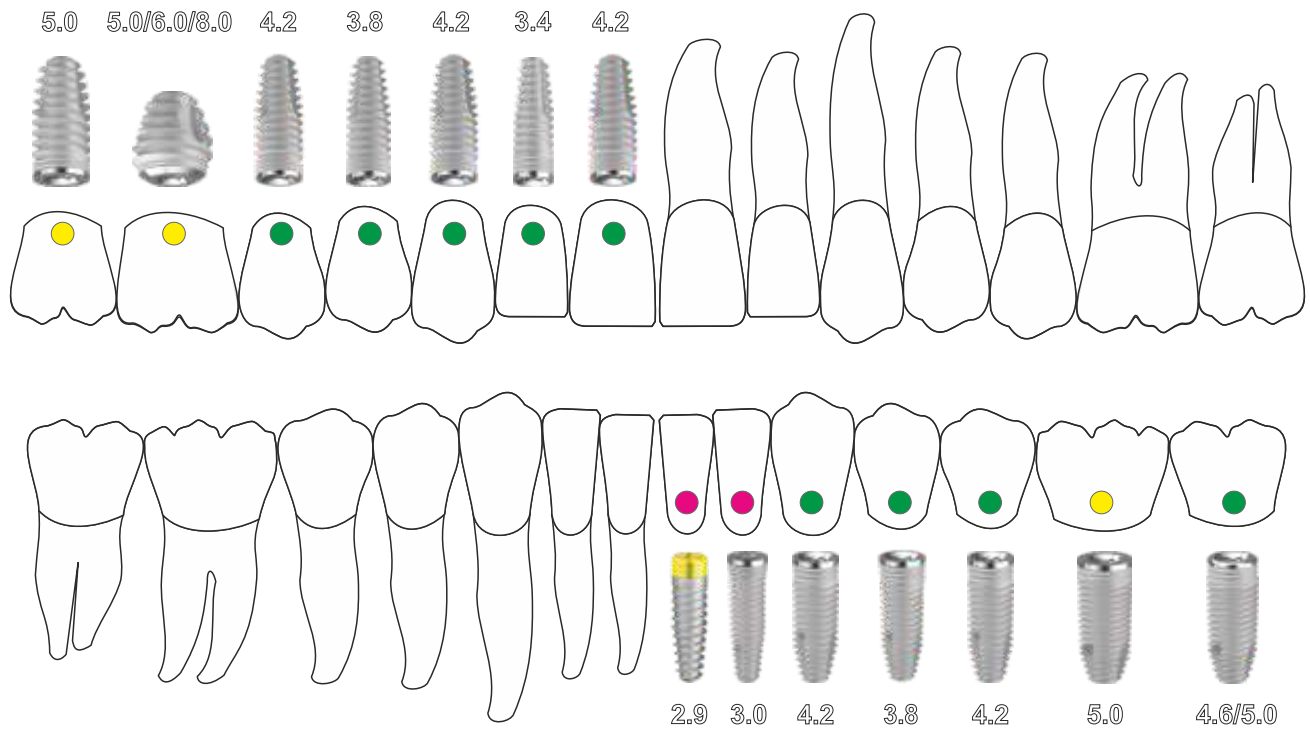


## Esempi di Protesi Mista Denti/Impianti Bilanciata Examples of Balanced Teeth/Implants Prosthetics Mixed

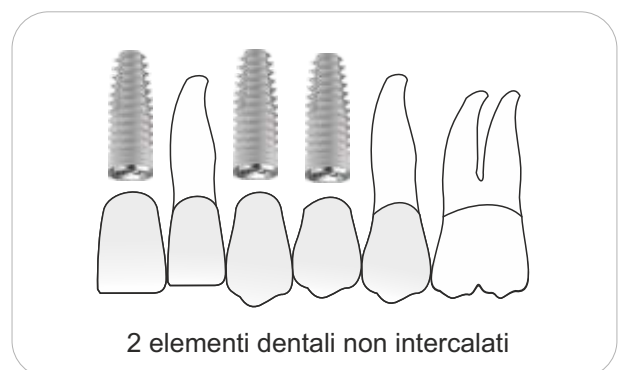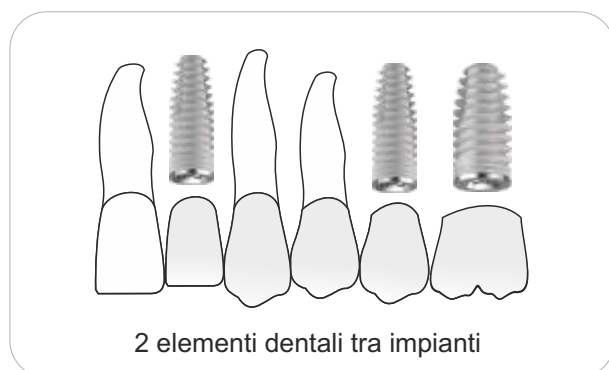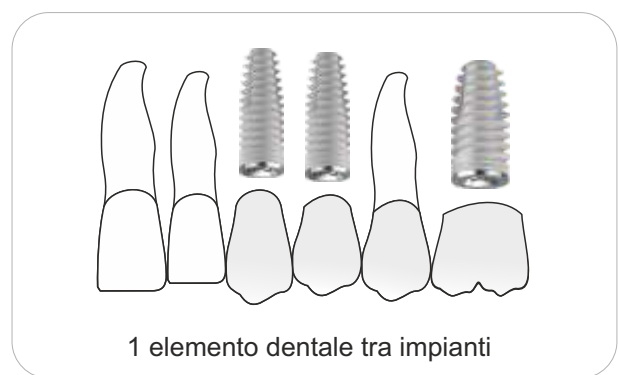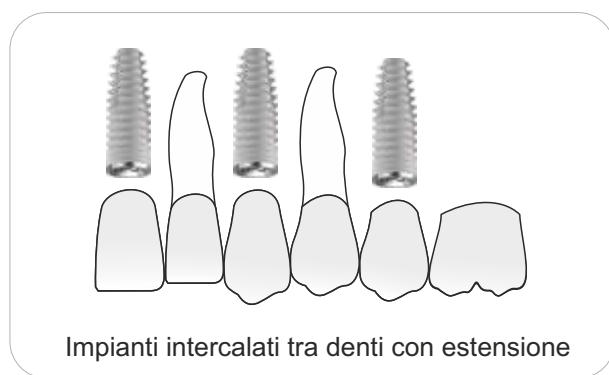

# micro geometry


## Il trattamento di superficie Micro-Nano Ruvido DAE accelera i processi di guarigione ossea

1. Rimuove i residui organici di lavorazione in combinazione con la Decontaminazione al Plasma d'Argon
2. Arrotonda gli angoli vivi eliminando i micro-difetti
3. Incrementa la superficie e la bagnabilità (idrofilia superficiale), migliorando l'adesione dei primi ponti di fibrina
4. Aumenta l'adesione proteica
5. Massimizza l'adesione cellulare con rugosità Micro-Nano Metriche ideali per l'ancoraggio dei filamenti di actina (filopodi)
6. Cambia la chimica superficiale del Titanio che migliorando in biocompatibilità incrementa la proliferazione e la vitalità cellulare

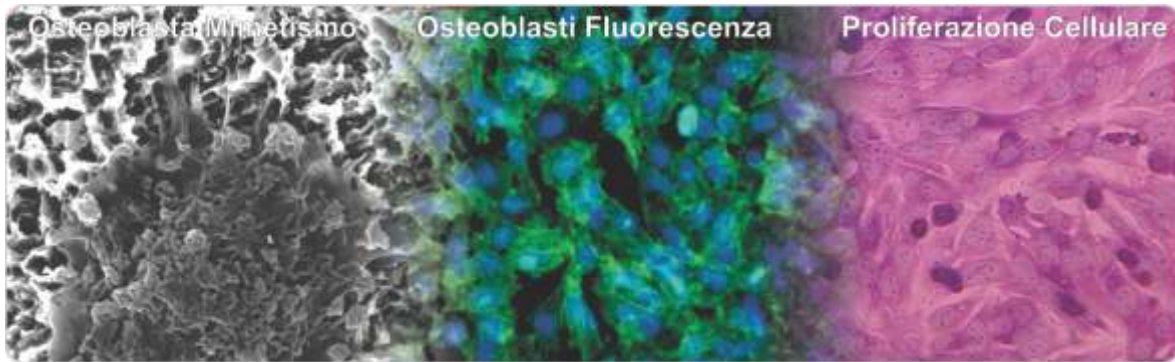

## La topografia e la chimica di superficie interagiscono con i processi di differenziazione cellulare

La superficie implantare usa la microtopografia come linguaggio di comunicazione con le cellule del tessuto ospite. La pulizia in reattore al plasma freddo di Argon con confezionamento in ambiente controllato nell'assoluto rispetto delle procedure, gioca un ruolo fondamentale nel controllo delle endotossine adese (principale agente di risposta immunologica alle superfici implantari).

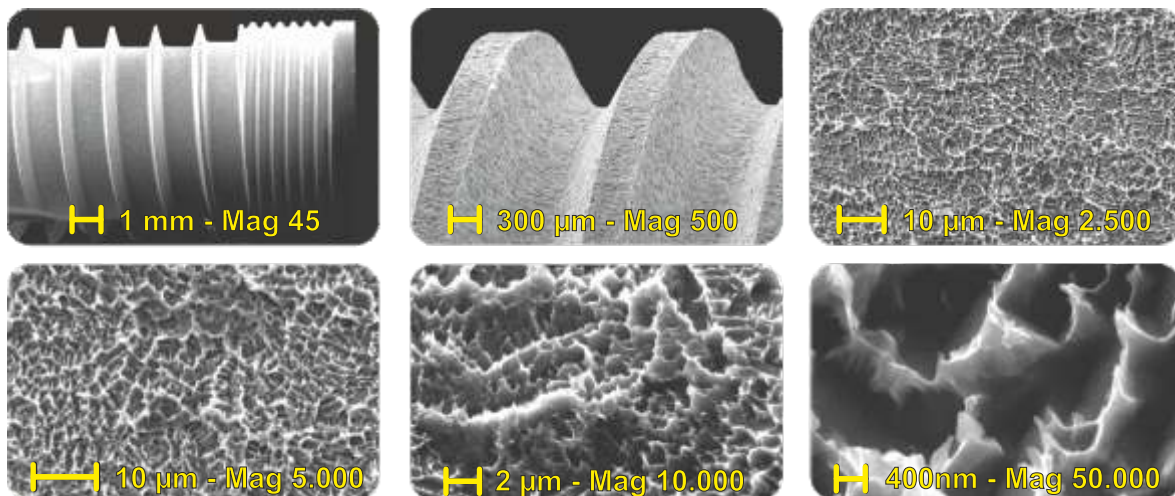

## The Micro-Nano Rough DAE surface treatment speed up bone healing processes

1. Removes the manufacturing organic residuals along with Argon Plasma Cleaning
2. Smooths the edge and eliminates the micro-defects
3. Increases surface and wettability (hydrophilicity surface), improving the first fibrin bridges adhesion
4. Increases protein adhesion
5. Maximizes cellular adhesion through the Micro-Nano roughness suitable for actin filaments (phyllopods) anchoring
6. Changes the Titanium surface chemical characteristics improving the biocompatibility and increasing the cellular proliferation and vitality

## Surface topography and chemistry interact with the cellular differentiation processes


The implant surface uses the microtopography as a communication language with the host tissue cells. The Plasma Argon Cold Cleaning with a controlled-environment packaging at a strict protocol procedures, play a key-role in the control of adhered endotoxins (main immunological response player to implant surfaces).

# micro geometry - 4 treatments

## DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI SUPERFICIE SULLA FORMA IMPLANTARE

Tutti gli impianti **Resista** presentano un trattamento di superficie localmente differenziato. La logica di distribuzione superficiale del trattamento è dettata dalla posizione endo-ossea dell'impianto che richiede caratteristiche differenti in funzione della presenza, più o meno ravvicinata della componente mucogengivale.

- 1. Superficie Machined:** Spazzolata, rettificata e mascherata nel processo di irruvidimento
- 2. Superficie Nanoruvida:** Trattamento veloce, nanoruvido con Ra medio inferiore al micron
- 3. Superficie Microruvida 3/5 $\mu$ :** Trattamento DAE, microruvido con Ra medio tra 3/5 micron
- 4. Superficie Microruvida 4/7 $\mu$ :** Trattamento DAE lento, microruvido con Ra medio tra 4/7 micron

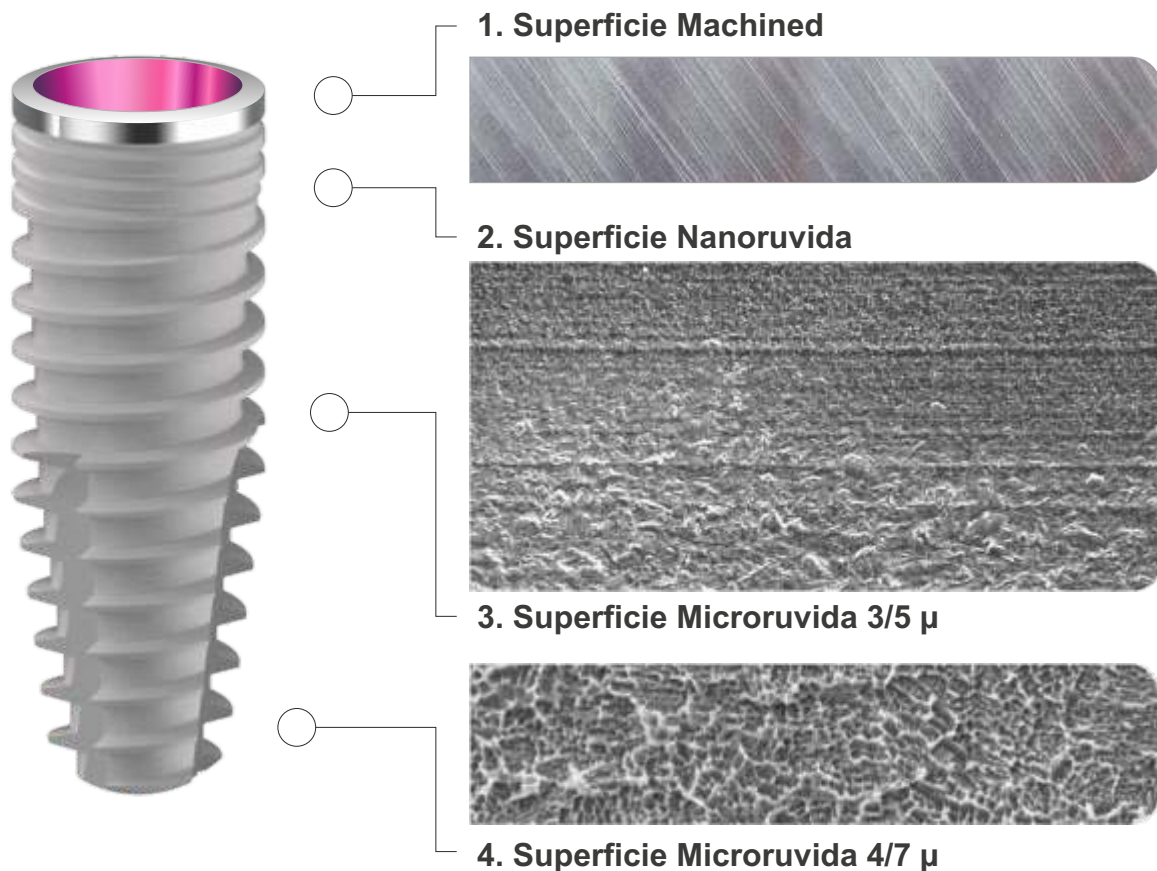

### VEGF/VEGF-R/RUNX2 Upregulation in Human Periodontal Ligament Stem Cells Seeded on Dual Acid Etched Titanium Disk

Francesca Diomede, Guya Diletta Marconi, Marcos F. X. B. Cavalcanti, Jacopo Pizzicannella, Sante Donato Pierdomenico, Luigia Fonticoli, Adriano Piattelli and Oriana Trubiani

Materials 2020, 13, 706; doi:10.3390/ma13030706



## SURFACE TREATMENT DISTRIBUTION ON IMPLANT'S BODY

All the **Resista's** implants have a surface treatment that is locally differentiated. The logic of surface treatment distribution is dictated by the endo-osseous implant position which requires different characteristics dependin on the muco-gingival component presence around.

- 1. Machined Surface:** Brushed, rectify and protected during the roughening process
- 2. Nano-rough Surface:** Speedy treatment, nano-rough with average Ra less than one micron
- 3. Micro-rough Surface: 3/5 $\mu$ :** DAE Treatment, micro-rough with average Ra between 3/5 $\mu$
- 4. Micro-rough Surface: 4/7 $\mu$ :** DAE Slow Treatment, micro-rough with average Ra between 4/7 $\mu$

## PUNTI DI FORZA DELLA LINEA IMPLANTARE RESISTA

- 1. Macro Geometrie:** Vastissima gamma di forme implantari per le differenti necessità in campo chirurgico (Cilindrici, Tapered, Attivi, Short, Mini ed Extra-Larghi)
- 2. Micro Geometrie:** Trattamenti di superficie differenziati (Full, Half e Machined) di ultima generazione (DAE Micro e Nano rugosi), decontaminati in Reattore al Plasma Freddo di Argon.



### The Bacterial Anti-Adhesive Activity of Double-Etched Titanium (DAE) as a Dental Implant Surface

Morena Petrini, Alessandra Giuliani, Emanuela Di Campi, Silvia Di Lodovico, Giovanna Iezzi, Adriano Piattelli and Simonetta D'Ercole<sup>1</sup>  
International Journal of Molecular Sciences 2020, 21, 8315; doi:10.3390/ijms21218315

- 3. Mounter Multifunzione:** 4 componenti in un unico articolo (Mounter, Transfer, Abutment e Mounter per Chirurgia Computer Guidata) per massimizzare la resa ed ottimizzare i costi.
- 4. Componenti protesiche:** Vastissima gamma di varianti protesiche con tolleranze di lavorazione sulle connessioni di 7 micron, con profili emergenti curvilinei, connessioni piane e coniche, platform switching, viti in Titanio Dorate e rivestimenti in PVD TiN (più estetica e minore ritenzione di placca).
- 5. Strumentario Chirurgico:** Frese chirurgiche **3-Tech**, massima efficienza, minima invasività, basso coefficiente di attrito, tecnologia **PRO MSD** per applicazione osseo-densificante in senso antiorario, lunga durata, perfetta visibilità delle tacche laser e stop chirurgici millimetrati.



## THE RESISTA'S IMPLANT LINE STRONG POINTS

- 1. Macro Geometry:** A vast range of implant shapes for different surgical needs (Cylinder, Tapered, Active, Short, Mini and Extra-Large)
- 2. Micro Geometry:** Last Generation Differentiated Surface (Full, Half and Machined) treated (DAE Micro and Nano rough), decontaminated in Argon Cold Plasma Reactor.
- 3. Multifunctional Mounter:** 4 components in a single article (Mounter, Transfer, Abutment and Mounter for Computer Guided Surgery) to maximize result and minimize costs.
- 4. Prosthetic Parts:** A very wide range of prosthetic variants with 7/10 micron machining tolerances on the connection, with emerging curvilinear profiles, flat and conical connections, platform switching, golden titanium screws and PVD TiN coatings (more aesthetic and less retention of dental plaque).
- 5. Surgical Instruments:** Surgical Drills **3-Tech**, maximum efficiency, minimum trauma, smaller friction coefficient, **PRO MSD** technology for counterclockwise bone densifying application long, lasting resistance, perfect visibility of laser marking and surgical millimeters stop.

# technology


## COERENZA E LOGICA NEL RAPPORTO DIAMETRO FRESA/DIAMETRO NOCCIOLO-IMPIANTO

Le progettazioni della forma degli strumenti rotanti si basa sulla logica coerenza tra la dimensione degli impianti, nell'ingombro esterno, nel nocciolo interno e per la loro capacità di penetrazione.

Gli **impianti cilindrici** della linea **IC** presentano una porzione apicale affusolata per una lunghezza di 3mm. Gli **impianti conici** della linea **IK** presentano una porzione apicale affusolata per una lunghezza di 5mm.

Le frese si presentano rispettivamente con 2 / 3 sezioni apicali, adeguate per una preparazione del tunnel implantare rispetto alla geometria dell'impianto, mantenendo il miglior BIC di interfaccia osso / impianto.

Ogni gradino è fornito di un tagliente affilato per agevolare la penetrazione, minimizzando l'attrito ed il surriscaldamento

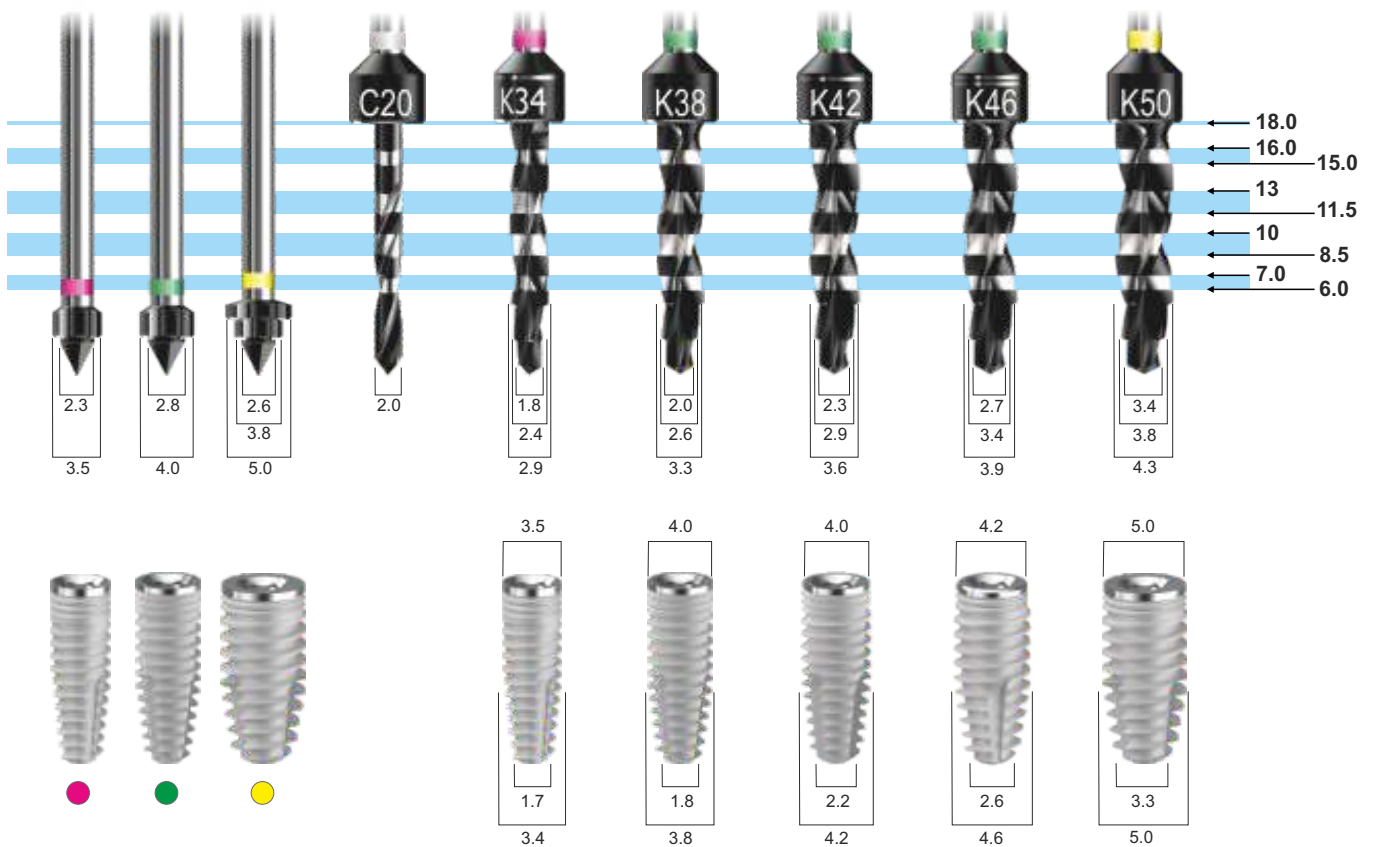

### Various bio-mechanical factors affecting heat generation during osteotomy preparation: A systematic review

Chirag J Chauhan<sup>1</sup>, Darshana N Shah<sup>1</sup>, Foram B Sutaria<sup>1</sup>

Indian J Dent Res. Jan-Feb 2018;29(1):81-92. doi: 10.4103/ijdr.IJDR\_729\_16.



## LOGIC RELATION BETWEEN DRILL AND IMPLANT CORE

The rotary instruments design and shape is based on the logical coherence between the implants size, in the external dimensions, internal core and their penetration properties.

The **IC** line **Cylindrical Implants** have a tapered apical portion 3mm long.

The **IK** line **Conical Implants** have a tapered apical portion 5mm long.

The drills have respectively 2/3 apical sections, suitable for the implant tunnel preparation, with respect to the implant geometry, maintaining the best bone implant contact (BIC).

Each step drill is equipped with a sharp cutting edge to facilitate penetration, minimizing friction and overheating.


# PRO MSD drilling technology

## IL CONDIZIONAMENTO DEI PROTOCOLLI CHIRURGICI

Le geometrie implantari differenziate nella macro/micro forma, prevedono applicazioni diverse sia in funzione delle necessità chirurgico/protesiche (carico immediato, carico precoce o carico posticipato) sia in base alle condizioni della componente ossea/anatomica del paziente da riabilitare.

Tuttavia, si richiedono spesso indispensabili manovre chirurgiche e protocolli alternativi per migliorare le prestazioni implantari in funzione delle caratteristiche morfologiche delle strutture ossee residue.

La riuscita di tali manovre, come risultato di applicazioni combinate di strumenti e protocolli personalizzati, rappresenta la differente risposta al problema in relazione alle personali capacità operatorie ed alla presenza più o meno marcata di strumenti e mezzi adeguati all'applicazione delle stesse.

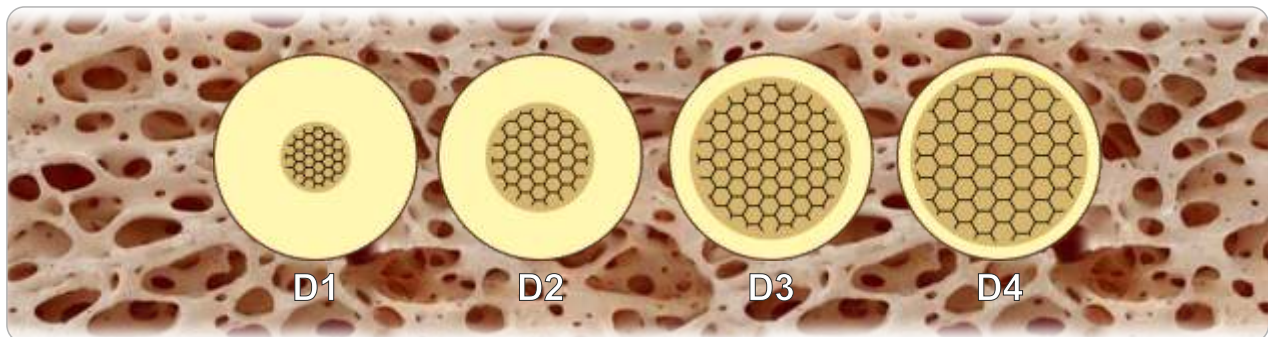

### ✓ Bone classification: clinical-histomorphometric comparison

Trisi P, Rao W. - Clin Oral Implants Res. 1999 Feb;10(1):1-7. doi: 10.1034/j.1600-0501.1999.100101.x.

## OSSEODENSIFICAZIONE MECCANICA IN ROTAZIONE ANTIORARIA

L'osseodensificazione tramite strumenti rotanti è una recente tecnica chirurgica per la preparazione del sito implantare che può essere associata a differenti protocolli, applicabili in quelle particolari condizioni anatomiche dove la qualità ossea risulta scarsa e con dimensioni verticali / orizzontali insufficienti.

Questo approccio di osseo-condensazione osteotomica non sottrattiva, genera un aumento della densità ossea peri-osteotomica, con il risparmio del tessuto stesso e l'incremento della stabilità primaria implantare.



## THE CONDITIONING OF SURGICAL PROTOCOLS

The differentiated implant geometries in the macro/micro shape provide for different applications, both according to the surgical/prosthetic requirements (immediate loading, early loading or postponed loading) and according to the conditions of the bone/anatomical component of the patient who needs rehabilitation. However, surgical maneuvers and alternative protocols are often required to improve implant performance, according to the morphological characteristics of the residual bone structures.

The success of these maneuvers, that is often the result of a customized tools and protocols combination, represents the different response to the problem in relation to the personal operating skills and the presence of tools suitable for their application.

## MECHANICAL OSSEODENSIFICATION IN ANTI-CLOCKWISE ROTATION

The osseodensification using rotary instruments is a recent surgical technique for the implant site preparation that can be associated with different protocols; these protocols can be used in those particular anatomical conditions such as poor bone quality and insufficient vertical / horizontal dimensions.

This non-subtractive osteotomic bone-condensation approach produces an increase in peri-osteotomic bone density, saving the tissue and increasing the primary implant stability.



# PRO MSD drilling technology

## FRESE CHIRURGICHE RESISTA PRO MSD - Modular Surgical Drilling

Le Frese Chirurgiche Modulari a geometria variabile sono frese elicoidali a 3 sezioni con spoglia raggiata progressiva, utilizzabili in senso **orario** ed **antiorario**.

Il diametro di ogni fresa varia, con un rapporto costante, di 0,4mm (30/34/38/42/46/50), permettendo così all'operatore la scelta di utilizzo in funzione della qualità ossea (sovra-preparazione o sotto-preparazione).


Tutte le frese sono rivestite con un coating di lubrificante solido in diamante sintetico DLC (Diamond Like Carbon) che massimizza le prestazioni in termini di resistenza meccanica e riduzione dell'attrito.

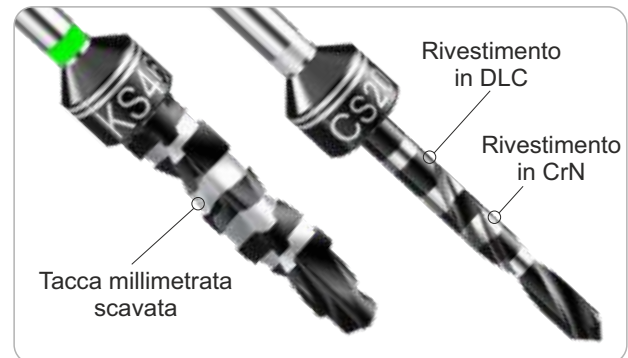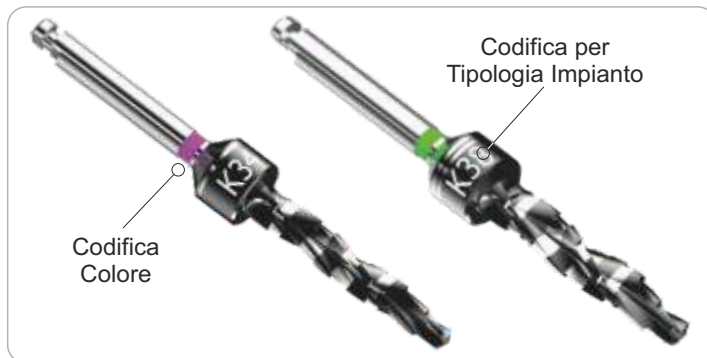

## ROTAZIONE ANTIORARIA

La rotazione antioraria, invertendo le forze in gioco, genera 3 effetti differenti sulla pratica chirurgica di preparazione del tunnel implantare, che possono rivoluzionare la logica di fresatura conosciuta.

- 1) Spinta anteriore e laterale dell'osso asportato dalla punta più tutti i liquidi in gioco, sangue e fisiologica.
- 2) Espulsione ad "effetto martello" della fresa, con un miglioramento del controllo verticale.
- 3) Riduzione dell'efficienza di taglio a salvaguardia delle parti anatomiche sensibili.

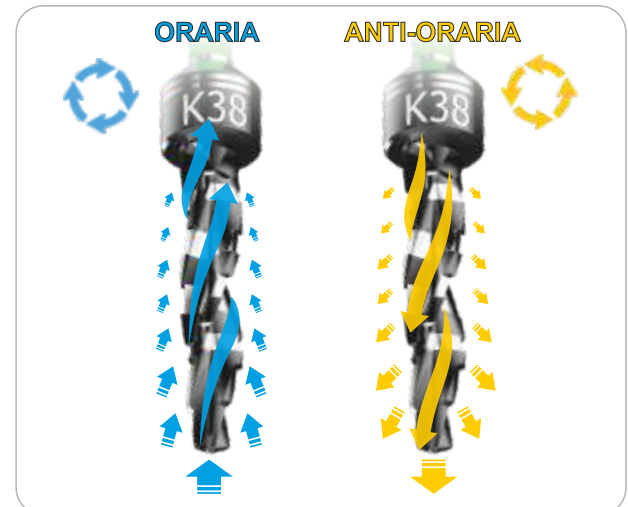

## RESISTA PRO MSD SURGICAL DRILLS - Modular Surgical Drilling

The Modular Surgical Drills with variable geometry are 3-section helicoidal drills with progressive radius rake, that can be used clockwise and anticlockwise.

The diameter of each drill changes according to a constant ratio of 0.4mm (30/34/38/42/46/50): this allows the operator to choose the drill according to the bone quality (over-preparation or under-preparation). All the drills are coated with a DLC (Diamond Like Carbon) synthetic diamond solid lubricant that maximizes performance in terms of mechanical strength and friction reduction.


The **anticlockwise rotation**, reversing the involved forces, generates 3 different effects on the implant tunnel perforation, which can revolutionize the known milling logic.

- 1) Anterior and lateral thrust of the bone removed by the tip, and of the liquids as well, blood and physiological water.
- 2) Ejection and "hammer effect" of the drill that produce an improvement in vertical control.
- 3) Reduction of cutting efficiency to protect sensitive anatomical parts.

# CONICAL CONNECTION

## NARROW PLATINUM

TAPERED  
SHAPE

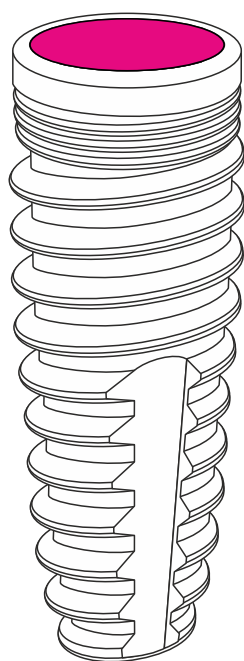

IK-P




IMPIANTO  
SENZA MOUNTER  
MOUNTERLESS


# IK 34-P

**NARROW K- PLATINUM**  
conical connection 12° - full treatment

## TAPERED SHAPE MOUNTERLESS

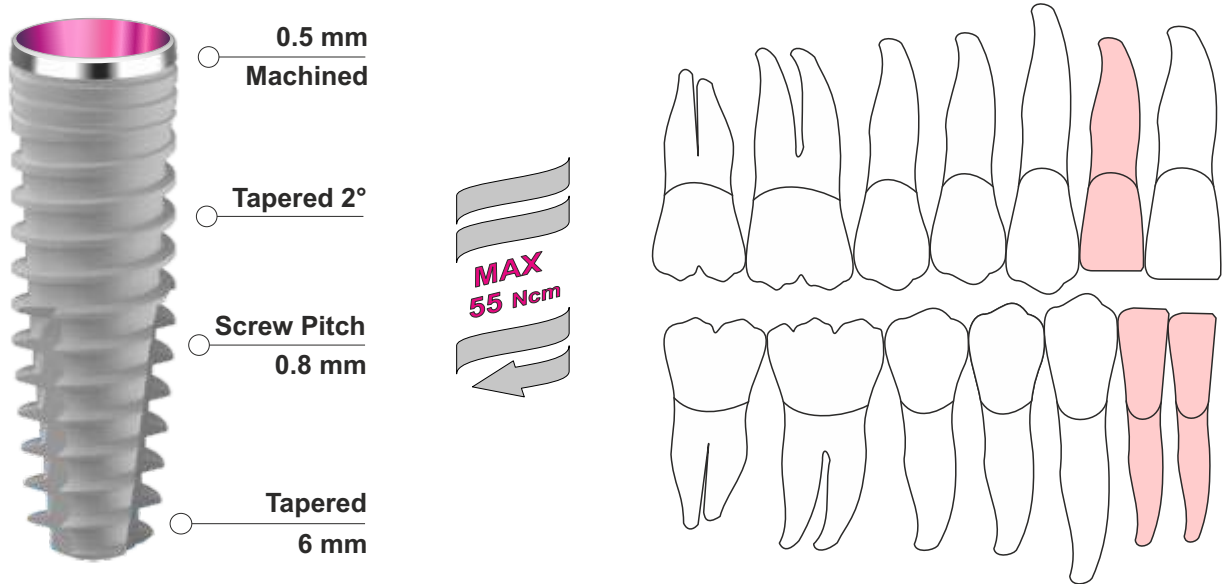


CODE	IMPLANT	LENGTH	NECK	APEX
IK 3407 P	Ø 3.4	7.0 mm	Ø 3.5	Ø 1.7
IK 3408 P	Ø 3.4	8.5 mm	Ø 3.5	Ø 1.7
IK 3410 P	Ø 3.4	10 mm	Ø 3.5	Ø 1.7
IK 3411 P	Ø 3.4	11.5 mm	Ø 3.5	Ø 1.7
IK 3413 P	Ø 3.4	13 mm	Ø 3.5	Ø 1.7
IK 3415 P	Ø 3.4	15 mm	Ø 3.5	Ø 1.7

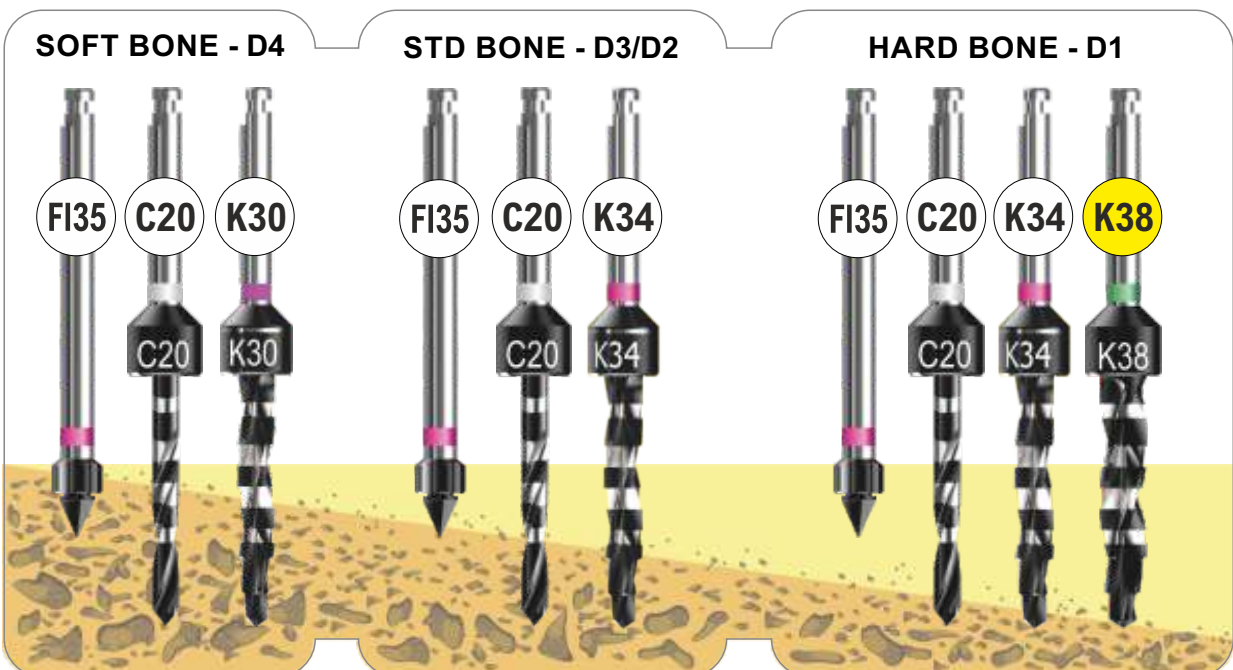


**NARROW K- PLATINUM**  
conical connection 12° - full treatment

**IK 38-P**

TAPERED SHAPE MOUNTERLESS

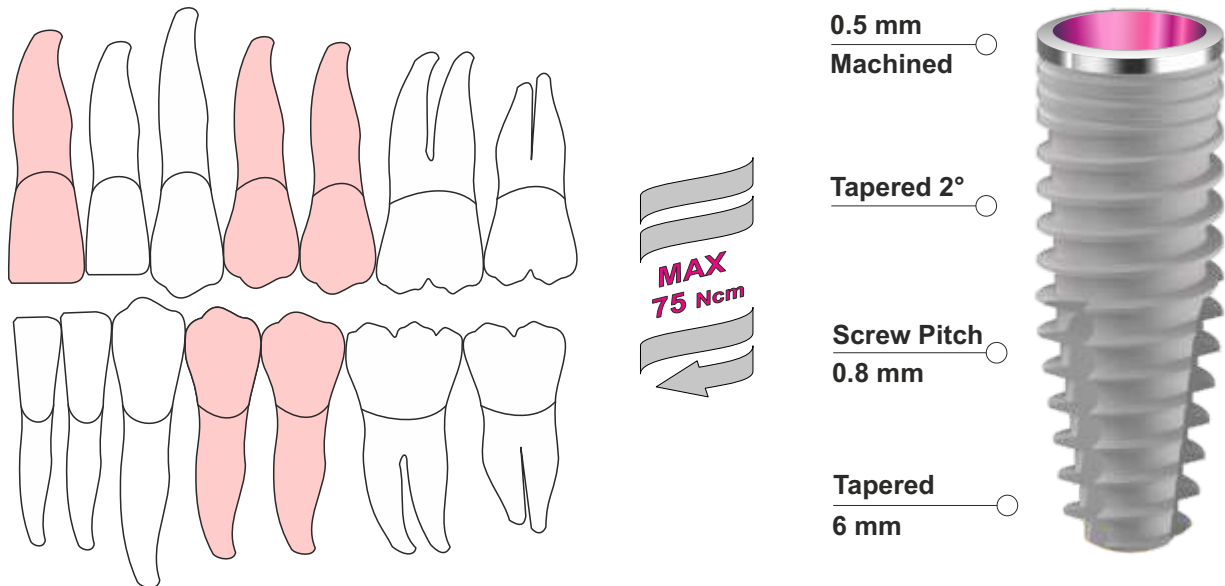


CODE	IMPLANT	LENGTH	NECK	APEX
IK 3808 P	Ø 3.8	8.5 mm	Ø 3.8	Ø 1.8
IK 3810 P	Ø 3.8	10 mm	Ø 3.8	Ø 1.8
IK 3811 P	Ø 3.8	11.5 mm	Ø 3.8	Ø 1.8
IK 3813 P	Ø 3.8	13 mm	Ø 3.8	Ø 1.8
IK 3815 P	Ø 3.8	15 mm	Ø 3.8	Ø 1.8

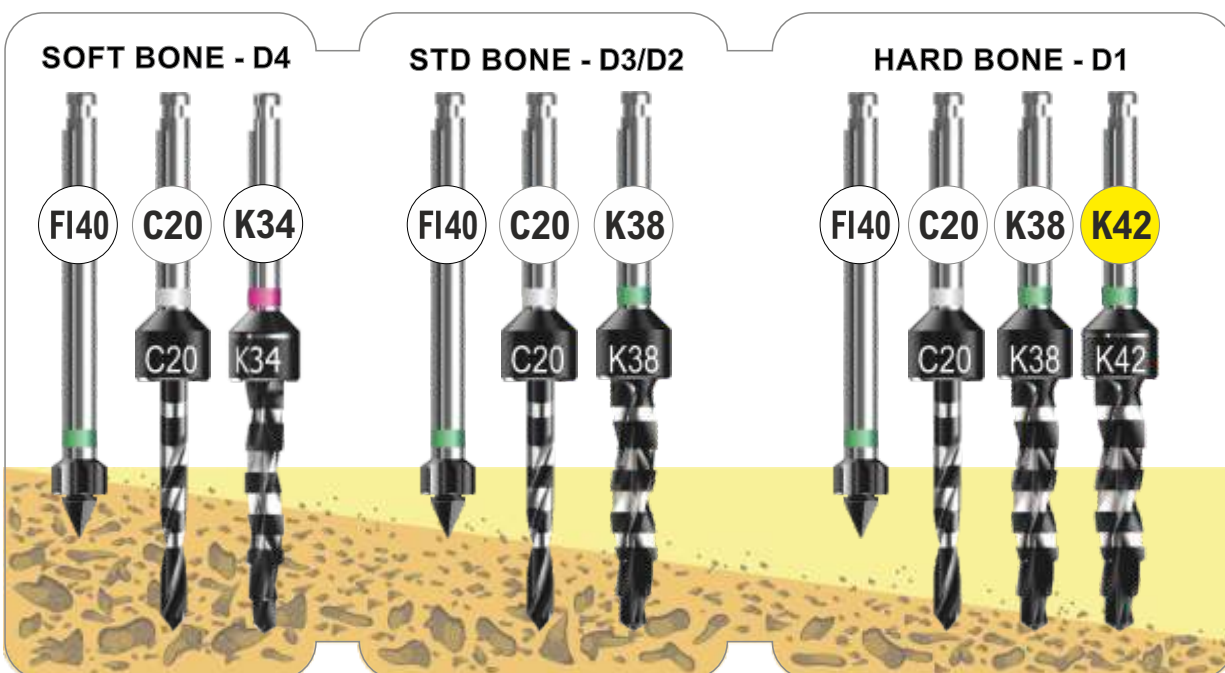


# CONICAL CONNECTION

## NARROW PLATINUM

### ACTIVE BLADE SHAPE

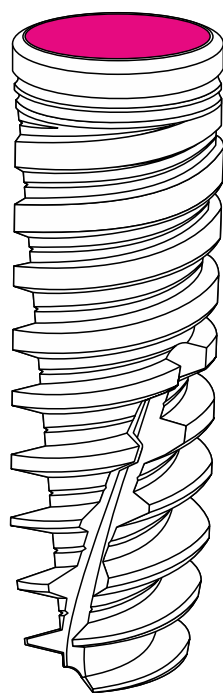

IA-P

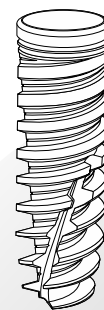


IMPIANTO  
SENZA MOUNTER  
MOUNTERLESS


# IA 34-P

**NARROW A - PLATINUM**  
conical connection 12° - full treatment

## ACTIVE BLADE SHAPE MOUNTERLESS

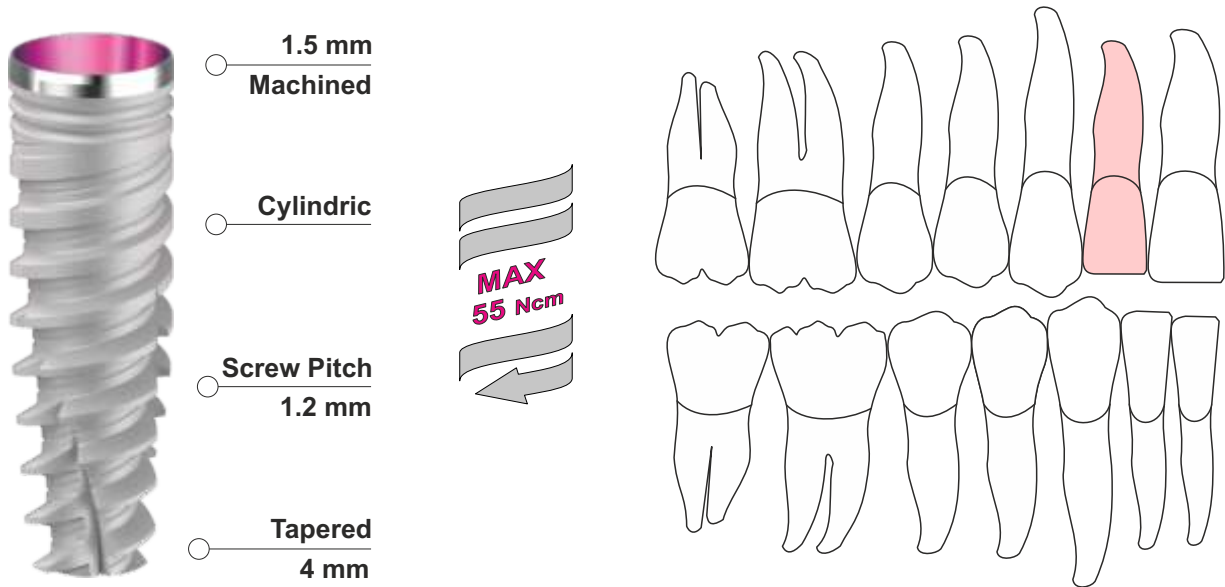

CODE	IMPLANT	LENGTH	NECK	APEX
IA 3408 P	Ø 3.4	8.5 mm	Ø 3.5	Ø 1.8
IA 3410 P	Ø 3.4	10 mm	Ø 3.5	Ø 1.8
IA 3411 P	Ø 3.4	11.5 mm	Ø 3.5	Ø 1.8
IA 3413 P	Ø 3.4	13 mm	Ø 3.5	Ø 1.8
IA 3415 P	Ø 3.4	15 mm	Ø 3.5	Ø 1.8

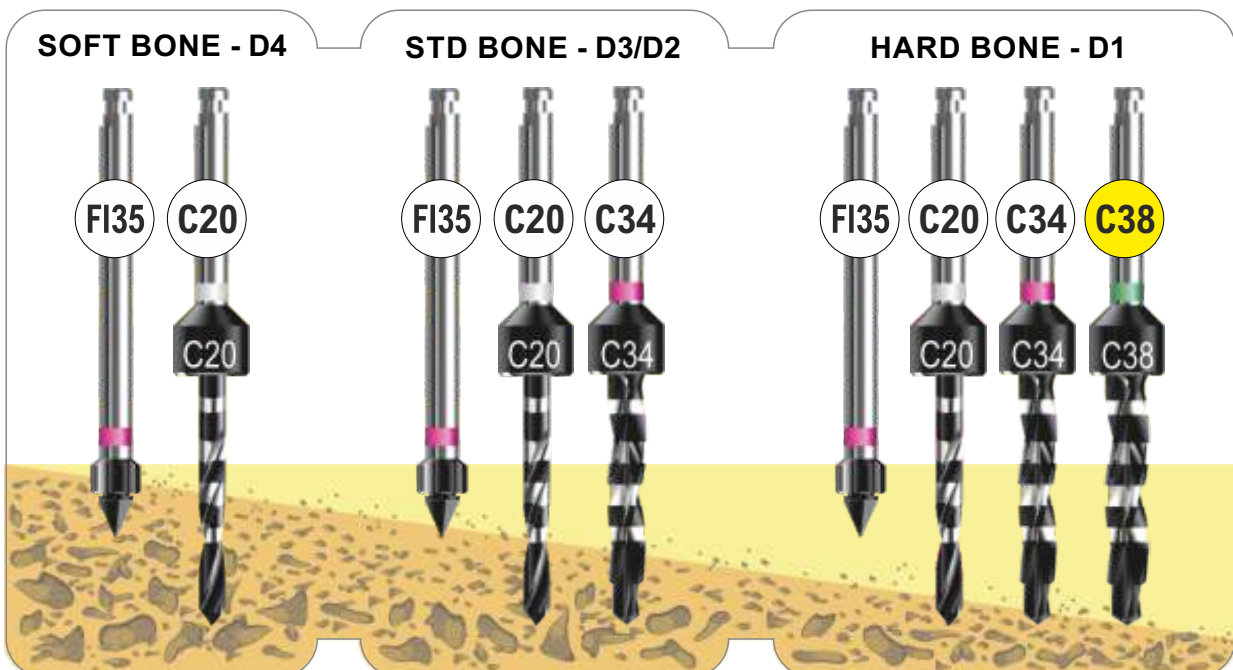


# NARROW A - PLATINUM


conical connection 12° - full treatment

# IA 38-P

## ACTIVE BLADE SHAPE MOUNTERLESS

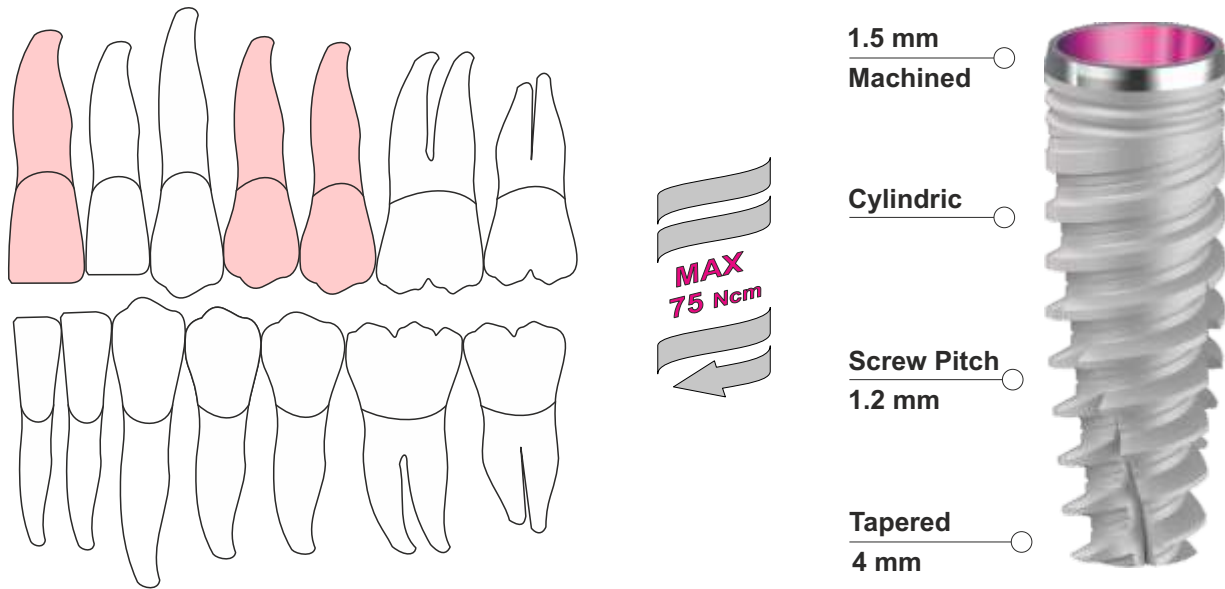


CODE	IMPLANT	LENGTH	NECK	APEX
IA 3808 P	Ø 3.8	8.5 mm	Ø 3.8	Ø 2.1
IA 3810 P	Ø 3.8	10 mm	Ø 3.8	Ø 2.1
IA 3811 P	Ø 3.8	11.5 mm	Ø 3.8	Ø 2.1
IA 3813 P	Ø 3.8	13 mm	Ø 3.8	Ø 2.1
IA 3815 P	Ø 3.8	15 mm	Ø 3.8	Ø 2.1

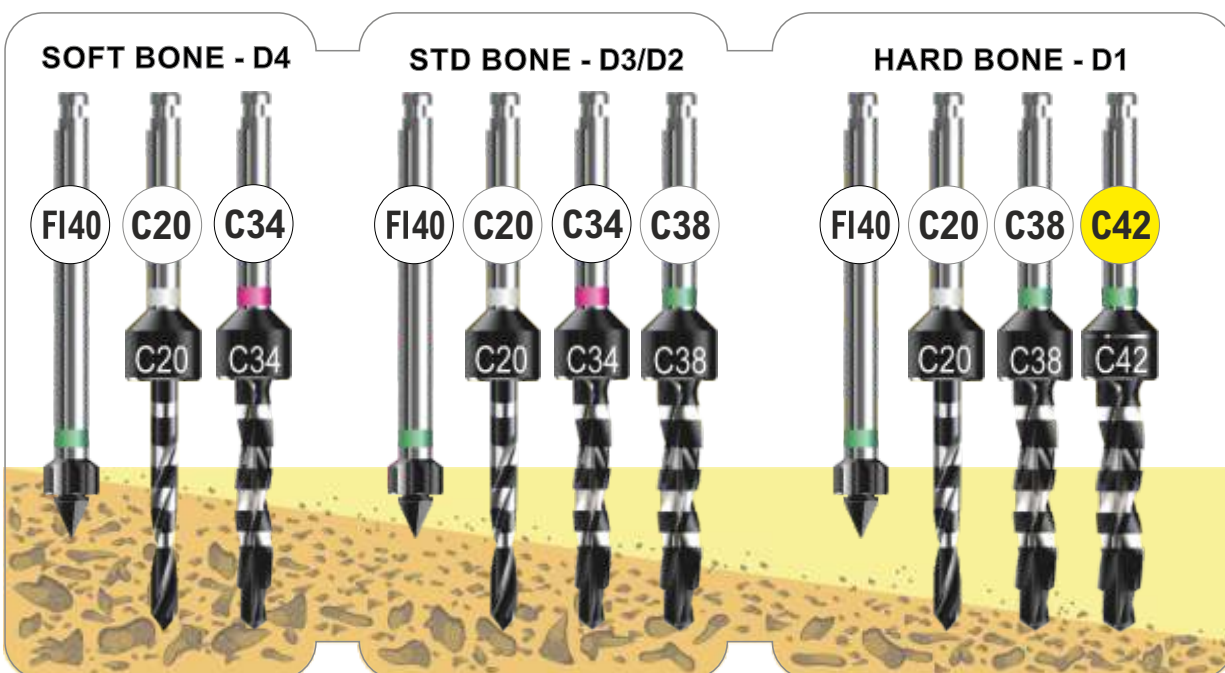


# CONICAL CONNECTION

## NARROW PLATINUM

SPEEDY  
SHAPE

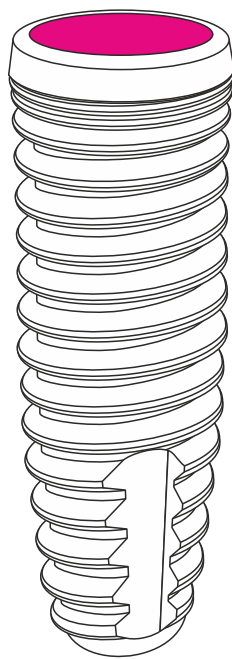

ES-P

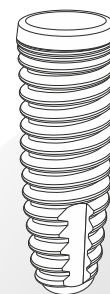


IMPIANTO  
SENZA MOUNTER  
MOUNTERLESS


# ES 34-P

**NARROW S- PLATINUM**  
conical connection 12° - full treatment

## SPEEDY SHAPE MOUNTERLESS

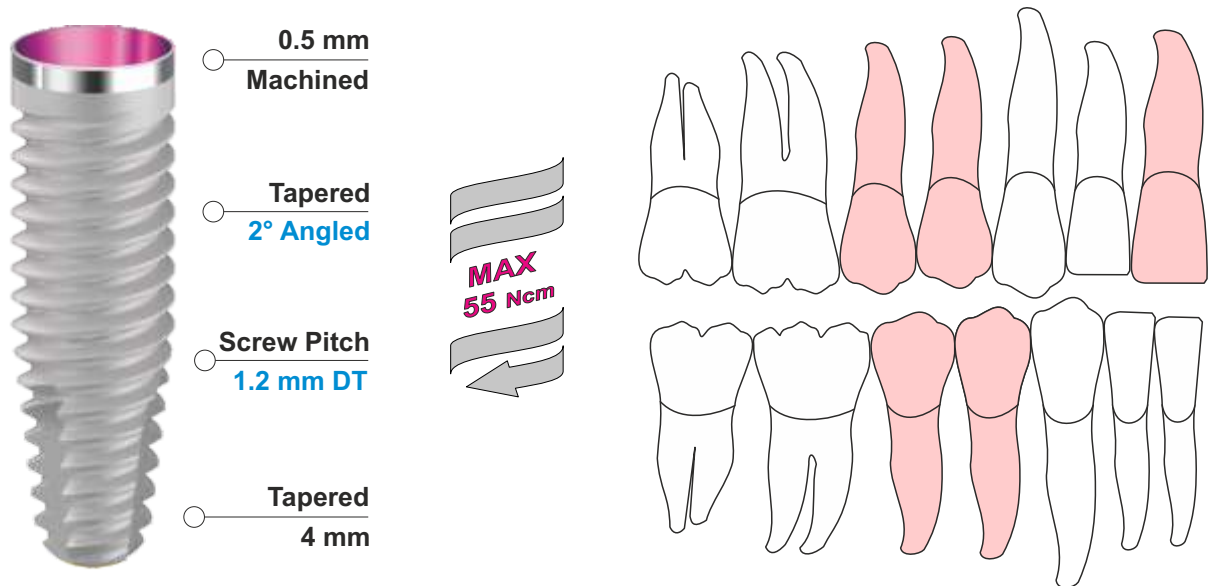


CODE	IMPLANT	LENGTH	NECK	APEX
ES 3408 P	Ø 3.4	8.5 mm	Ø 3.5	Ø 1.8
ES 3410 P	Ø 3.4	10 mm	Ø 3.5	Ø 1.8
ES 3411 P	Ø 3.4	11.5 mm	Ø 3.5	Ø 1.8
ES 3413 P	Ø 3.4	13 mm	Ø 3.5	Ø 1.8
ES 3415 P	Ø 3.4	15 mm	Ø 3.5	Ø 1.8

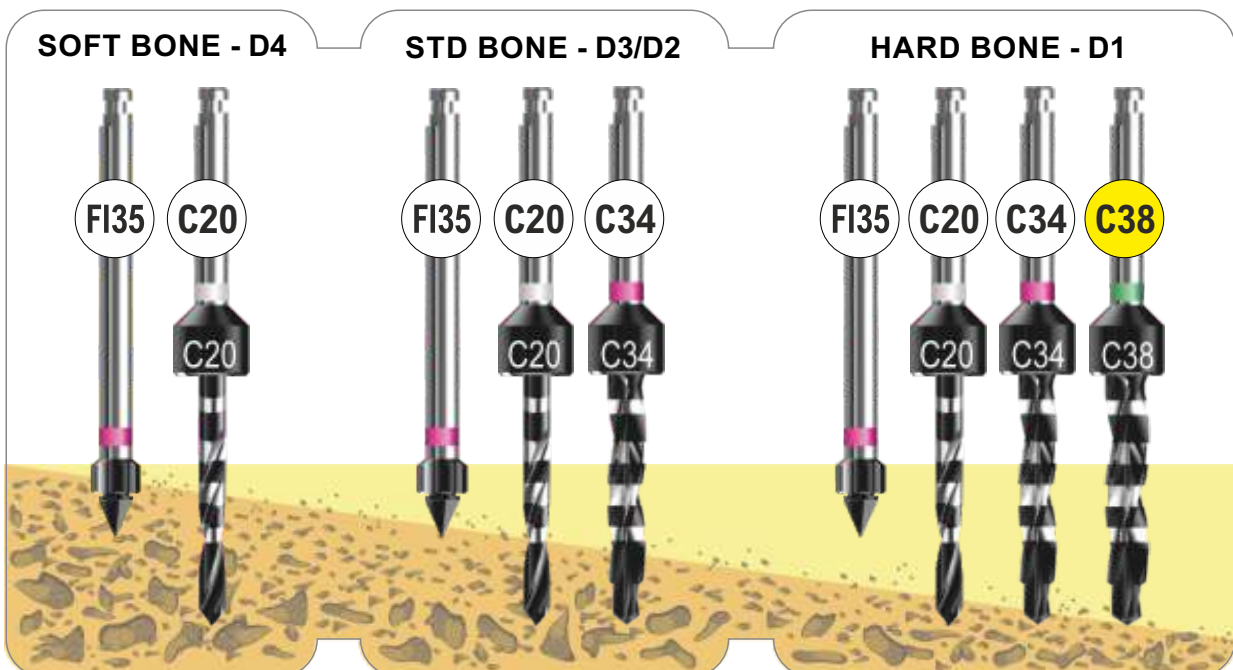


**NARROW S - PLATINUM**  
conical connection 12° - full treatment

**ES 38-P**

ACTIVE BLADE SHAPE MOUNTERLESS

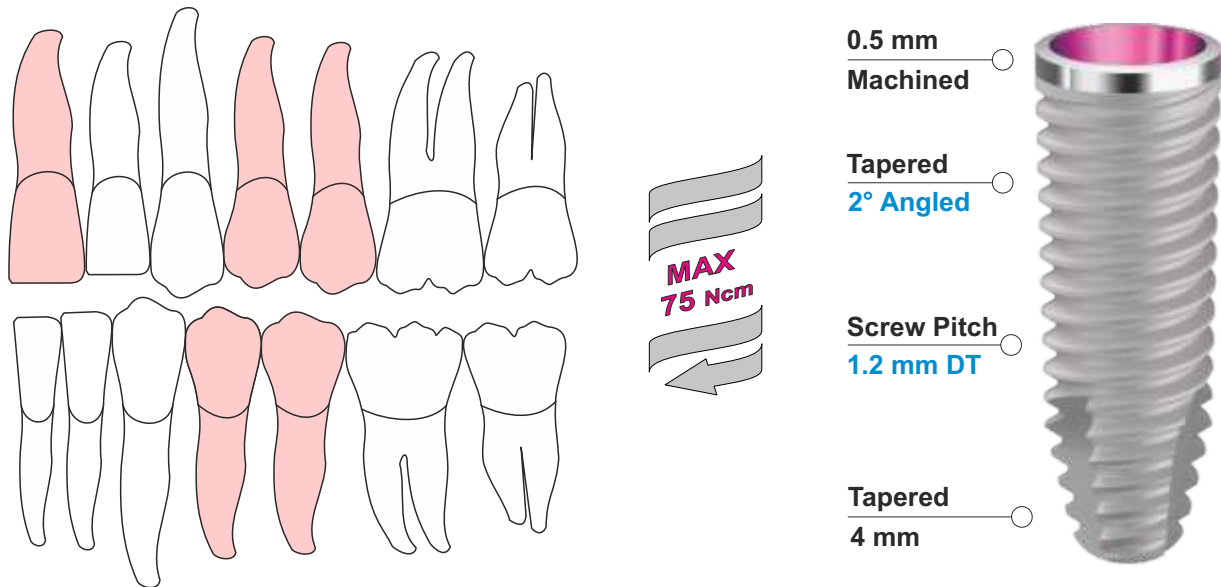

CODE	IMPLANT	LENGTH	NECK	APEX
ES 3808 P	Ø 3.8	8.5 mm	Ø 3.8	Ø 2.0
ES 3810 P	Ø 3.8	10 mm	Ø 3.8	Ø 2.0
ES 3811 P	Ø 3.8	11.5 mm	Ø 3.8	Ø 2.0
ES 3813 P	Ø 3.8	13 mm	Ø 3.8	Ø 2.0
ES 3815 P	Ø 3.8	15 mm	Ø 3.8	Ø 2.0

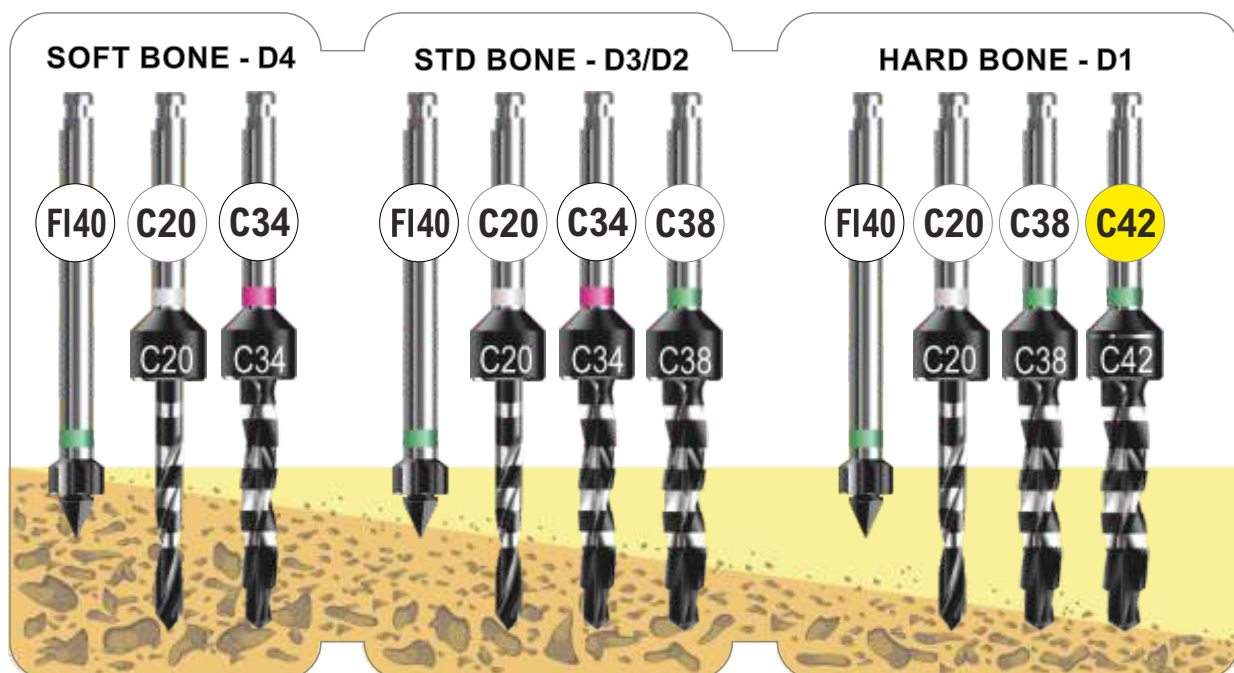

# CONICAL CONNECTION

## NARROW PLATINUM

### NARROW PROSTHETICS



# narrow CCP prosthetics

20Ncm 



## Pilastro di Guarigione - Titanio Gr. 5 - Anodizzato

Healing Abutment - Titanium Gr. 5 - Anodized

**IP 3HA3-P** H 3 mm - Narrow Gingival Profile

**IP 3HA4-P** H 4 mm - Narrow Gingival Profile

**IP 3HA5-P** H 5 mm - Narrow Gingival Profile

**DMX 1/2** Standard Torx Driver



## Analogo per Laboratorio - Titanio Gr. 5 - Anodizzato

Laboratory Analog - Titanium Gr. 5 - Anodized

**IP 3AL-P** H 12 mm - Universal Shape

25Ncm 



## Moncone UCLA Cobalto Cromo - CoCr

UCLA Abutment Cobalt Chrome - CoCr

**IP 3CCA-P** Antirotation Hex - Narrow Gingival Profile H1,5mm

**IP 3CCR-P** Rotating - Narrow Gingival Profile H1,5mm

**IP VIT3-P** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMX 1/2** Standard Torx Driver

25Ncm 



## Moncone Titanio Dritto - Titanio Gr. 5

Straight Titanium Abutment - Titanium Gr. 5

**IP 3ST1-P** 0° - Straight - Narrow Gingival Profile H1.5mm

**IP 3ST3-P** 0° - Straight - Narrow Gingival Profile H3.0mm

**IP 3ST4-P** 0° - Straight - Narrow Gingival Profile H4.0mm

**IP VIT3-P** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMX 1/2** Standard Torx Driver

25Ncm 



## Moncone Titanio Preangolato 15° - Titanio Gr. 5

15° Angled Titanium Abutment - Titanium Gr. 5

**IP 3AT151-P** 15° - Angled - Narrow Gingival Profile H1.5mm

**IP 3AT153-P** 15° - Angled - Narrow Gingival Profile H3.0mm

**IP 3AT154-P** 15° - Angled - Narrow Gingival Profile H4.0mm

**IP VIT3-P** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMX 1/2** Standard Torx Driver

# narrow CCP prosthetics

## Moncone Titanio Preangolato 25° - Titanio Gr. 5

25° Angled Titanium Abutment - Titanium Gr. 5

**IP 3AT251-P** 25° - Angled - Narrow Gingival Profile H1.5mm

**IP 3AT253-P** 25° - Angled - Narrow Gingival Profile H3.0mm

**IP 3AT254-P** 25° - Angled - Narrow Gingival Profile H4.0mm

**IP VIT3-P** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMX 1/2** Standard Torx Driver



## Pilastro Temporaneo da Incollaggio - Ti Gr. 5

Temporary Glueing Abutment - Ti Gr. 5

**IP 3TA1-P** Antirotaion Hex - Narrow Gingival Profile H 1.5mm

**IP 3TA3-P** Antirotaion Hex - Narrow Gingival Profile H 3.0mm

**IP 3TR1-P** Rotating - Narrow Gingival Profile H 1.5mm

**IP 3TR3-P** Rotating - Narrow Gingival Profile H 3.0mm

**DMX 1/2** Standard Torx Driver



## Pilastro per Overdenture - Titanio Gr. 5 - PVD TiN

Overdenture Abutment - Titanium Gr. 5 - PVD TiN

**IP 3BA1-P** H 1 mm - Narrow Gingival Profile - NORMO

**IP 3BA2-P** H 2 mm - Narrow Gingival Profile - NORMO

**IP 3BA3-P** H 3 mm - Narrow Gingival Profile - NORMO

**IP 3BA4-P** H 4 mm - Narrow Gingival Profile - NORMO

**DMX 1/2** Standard Torx Driver



## Kit Pilastro Equator per Overdenture - Titanio Gr. 5 - PVD

Overdenture Equator Abutment Kit - Titanium Gr. 5 - PVD

**IP 3EQ1-P** H 1 mm - Narrow Gingival Profile

**IP 3EQ2-P** H 2 mm - Narrow Gingival Profile

**IP 3EQ3-P** H 3 mm - Narrow Gingival Profile

**IP 3EQ5-P** H 5 mm - Narrow Gingival Profile

**DM EQ** Squared Equator Driver



## Transfer per impronta Pick Up - Titanio Gr. 5

Pick Up Impression Coping - Titanium Gr. 5

**IP 3IA1-P** Narrow Gingival Profile - H1.5mm

**IP 3IA3-P** Narrow Gingival Profile - H3.0mm


**IP 3IA4-P** Narrow Gingival Profile - H4.0mm

**IP VIT3L-P** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMX 1/2** Standard Torx Driver



# toronto narrow CCP prosthetics

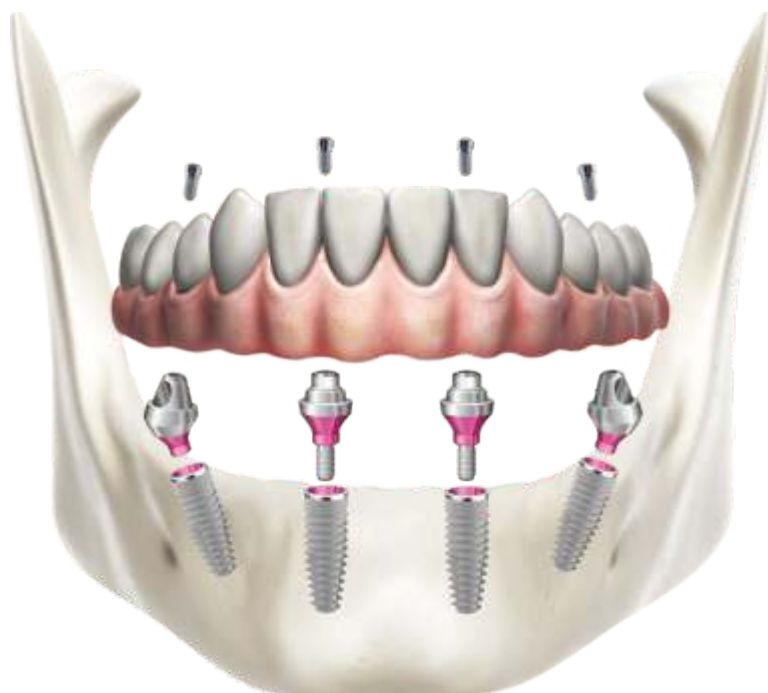

25Ncm



## Pilastro Toronto Diritto - Titanio Gr. 5

Toronto Straight Abutment - Titanium Gr. 5

- IP 3MS1-P H 1.5 mm - Standard Gingival Profile
- IP 3MS3-P H 3.0 mm - Standard Gingival Profile
- IP 3MS4-P H 4.0 mm - Standard Gingival Profile

DCDM

Toronto Straight Abutment Driver

25Ncm



## Pilastro Toronto Angolato 17° - Titanio Gr. 5

Toronto 17° Angled Abutment - Titanium Gr. 5

- IP 3MA172-P 17° - H 2 mm - Standard Gingival Profile
- IP 3MA173-P 17° - H 3 mm - Standard Gingival Profile

IP 3VITMA-P Vite di Ricambio Toronto - Toronto Spare Screw  
DMX 1/2 Standard Torx Driver

25Ncm



## Pilastro Toronto Angolato 30° - Titanio Gr. 5

Toronto 30° Angled Abutment - Titanium Gr. 5

- IP 3MA303-P 30° - H 3 mm - Standard Gingival Profile
- IP 3MA304-P 30° - H 4 mm - Standard Gingival Profile


IP 3VITMA-P Vite di Ricambio Toronto - Toronto Spare Screw  
DMX 1/2 Standard Torx Driver

# toronto narrow CCP prosthetics

## Pilastro Calcinabile Toronto & Pilastro di Guarigione

### Toronto Castable Abutment & Healing Abutment

- EP MC** Rotating Castable Abutment
- EP MHA** H 4 mm - Standard Gingival Profile Titanium Gr5
- EP MHA6** H 6 mm - Large Gingival Profile Titanium Gr5
- EP MV** Vite di Ricambio Toronto - Toronto Spare Screw
- DMX 1/2** Standard Torx Driver

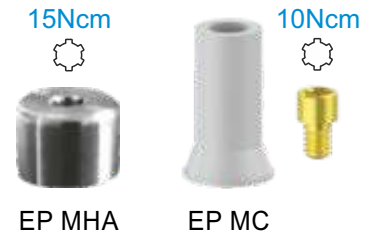

## Componenti Protesiche Toronto - Titanio Gr. 5

### Toronto Prosthetics - Titanium Gr. 5

- EP MI** Rotating - Standard Gingival Profile
- EP MAL2DS** Digital Toronto Analog - Analogo Digitale
- EP MT** Rotating Temporary - Incollaggio Passivo
- EP MTS** Rotating Welding Temporary - Saldatura Intraorale
- EP MVL** Vite di Ricambio Lunga - Long Spare Screw
- DMX 1/2** Standard Torx Driver



## Transfer Toronto & Link da Incollaggio - Titanio Gr. 5

### Toronto Scan Abutment & Link - Titanium Gr. 5

- EP MSA2 DS** Toronto Rotating Scan Abutment
- EP MT DS** Toronto Rotating - Bonding Technique Link
- EP MV** Vite di Ricambio Toronto - Toronto Spare Screw
- DMX 1/2** Standard Torx Driver

## Digital Solutions



## Componenti Digitali CCP - Titanio Gr. 5

### CCP Digital Components - Titanium Gr. 5

- ACT SB35K** Antirotational Scan Abutment
- ACT LKN35K** Antirotational Bonding Technique Link
- ACT LKR35K** Rotating Bonding Technique Link
- ACT AN3D35K** CAD Laboratory Analog
- ACT VP16** Vite di Ricambio - Spare Screw
- DMX 1/2** Standard Torx Driver




Analog

Adjustable in 3 heights


# CONICAL CONNECTION

## REGULAR PLATINUM

TAPERED  
SHAPE

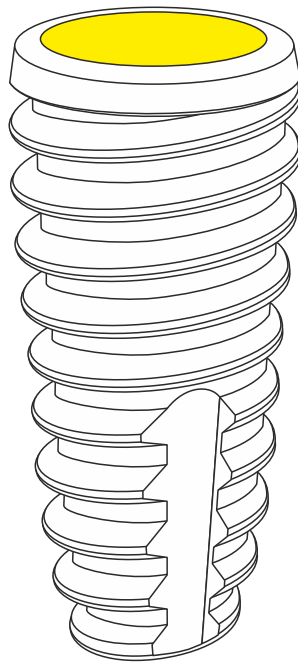

IK-P

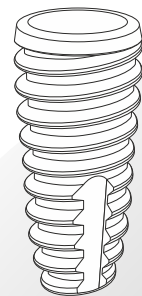


IMPIANTO  
SENZA MOUNTER  
MOUNTERLESS


# IK 42-P

REGULAR K - PLATINUM  
conical connection 12° - full treatment

## TAPERED SHAPE MOUNTERLESS

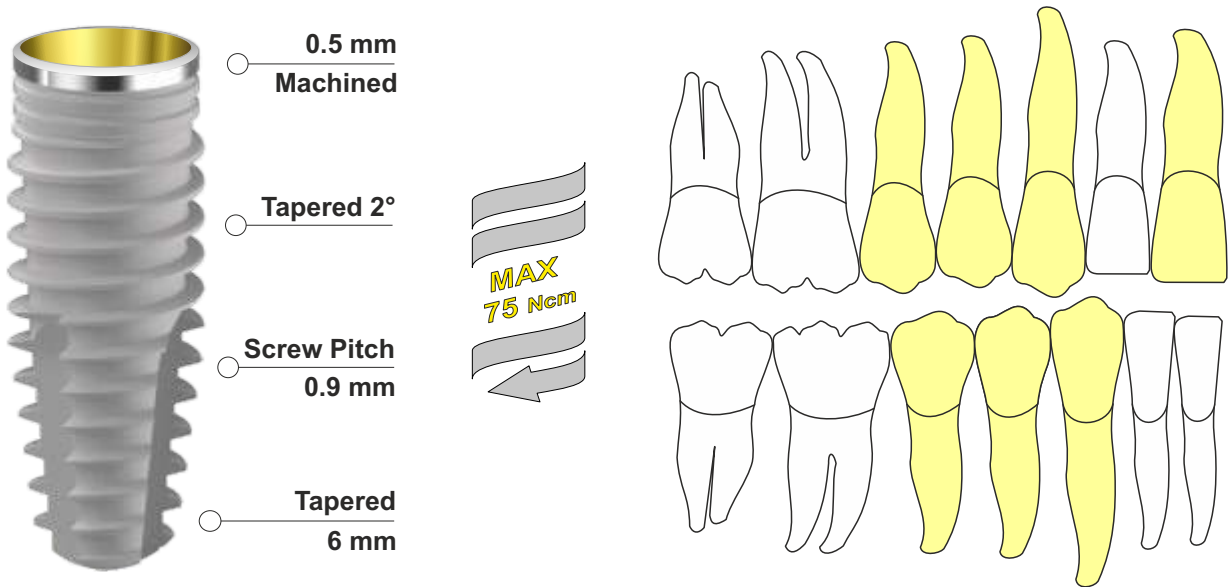




CODE	IMPLANT	LENGTH	NECK	APEX
IK 4207 P	Ø 4.2	7.0 mm	Ø 4.0	Ø 2.2
IK 4208 P	Ø 4.2	8.5 mm	Ø 4.0	Ø 2.2
IK 4210 P	Ø 4.2	10 mm	Ø 4.0	Ø 2.2
IK 4211 P	Ø 4.2	11.5 mm	Ø 4.0	Ø 2.2
IK 4213 P	Ø 4.2	13 mm	Ø 4.0	Ø 2.2
IK 4215 P	Ø 4.2	15 mm	Ø 4.0	Ø 2.2

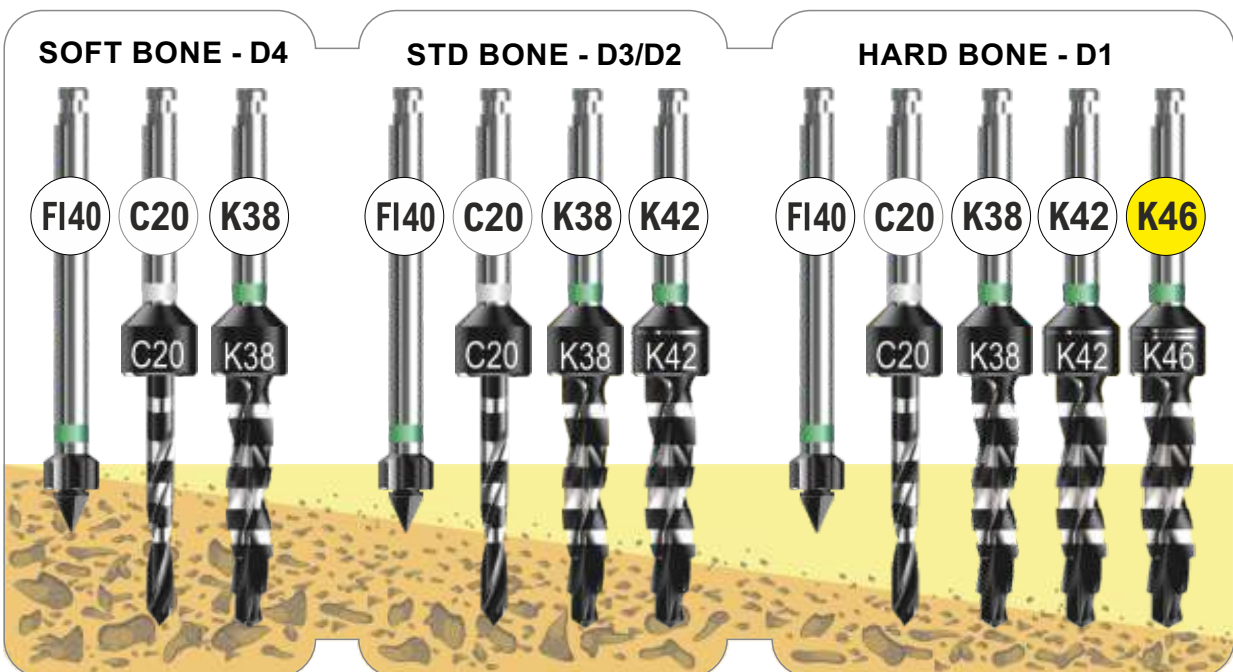


**REGULAR K - PLATINUM**  
conical connection 12° - full treatment

**IK 50-P**

TAPERED SHAPE MOUNTERLESS

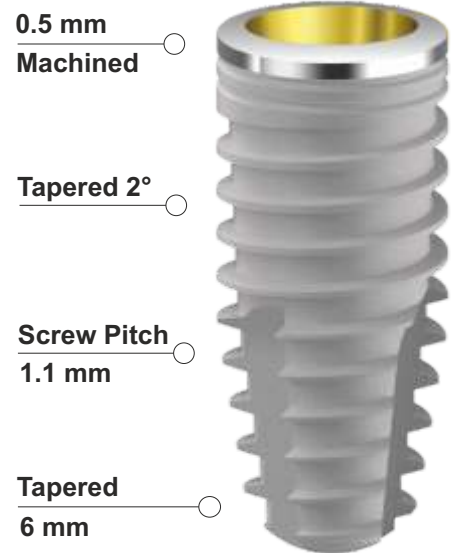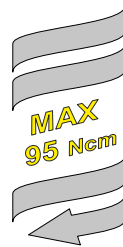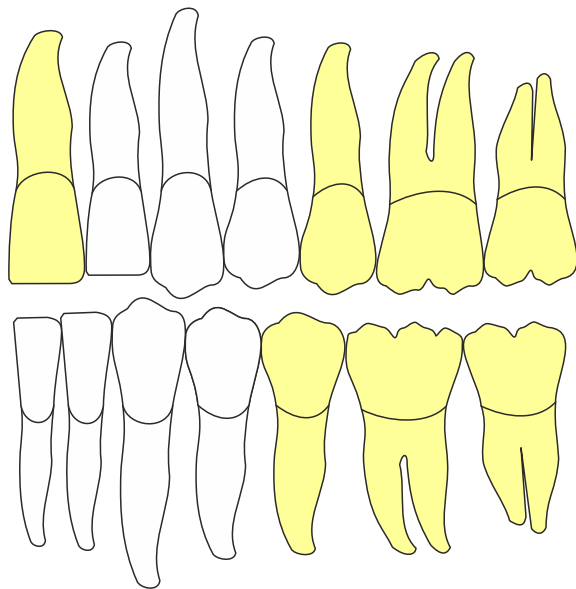


CODE	IMPLANT	LENGTH	NECK	APEX
IK 5007 P	Ø 5.0	7.0 mm	Ø 4.8	Ø 3.3
IK 5008 P	Ø 5.0	8.5 mm	Ø 4.8	Ø 3.3
IK 5010 P	Ø 5.0	10 mm	Ø 4.8	Ø 3.3
IK 5011 P	Ø 5.0	11.5 mm	Ø 4.8	Ø 3.3
IK 5013 P	Ø 5.0	13 mm	Ø 4.8	Ø 3.3

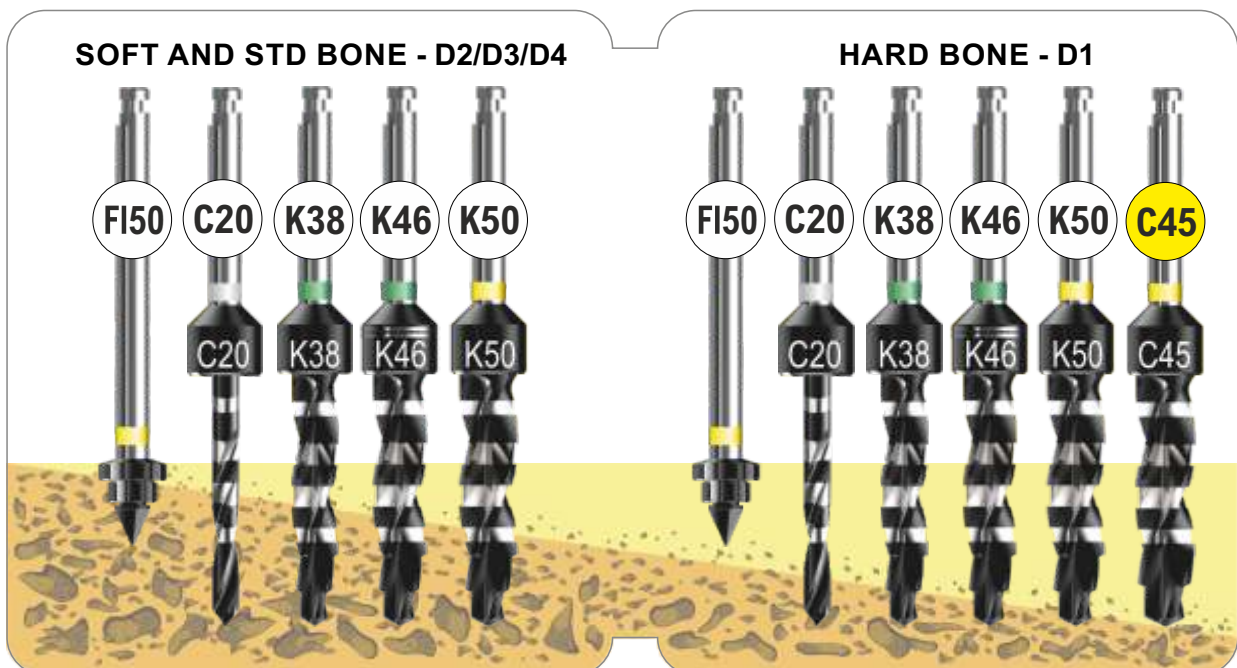


# CONICAL CONNECTION

## REGULAR PLATINUM

### ACTIVE BLADE SHAPE

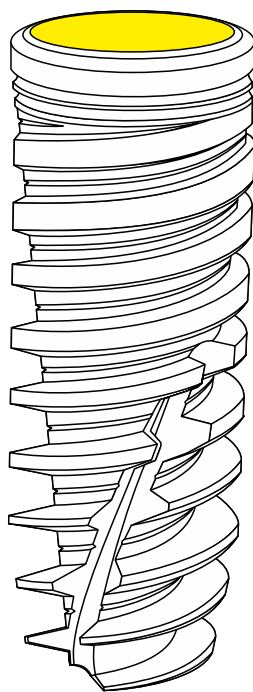

IA-P

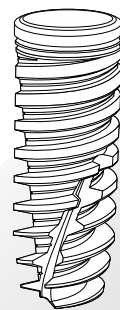


IMPIANTO  
**SENZA MOUNTER**  
MOUNTERLESS


# IA 42-P

REGULAR A - PLATINUM  
conical connection 12° - full treatment

## ACTIVE BLADE SHAPE MOUNTERLESS

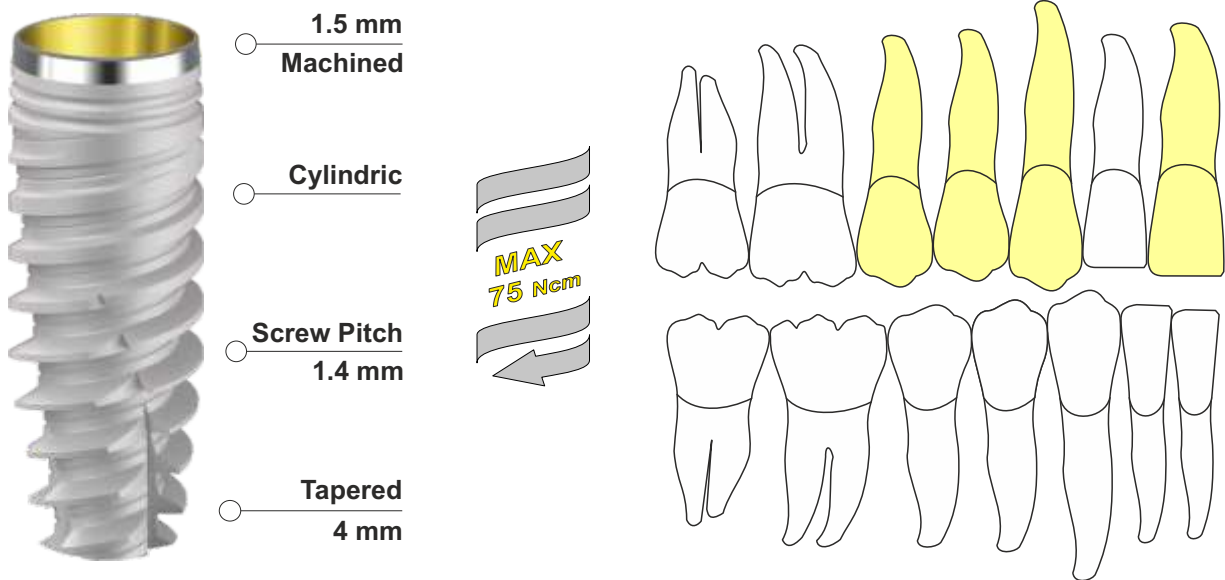



CODE	IMPLANT	LENGTH	NECK	APEX
IA 4208 P	Ø 4.2	8.5 mm	Ø 4.0	Ø 2.2
IA 4210 P	Ø 4.2	10 mm	Ø 4.0	Ø 2.2
IA 4211 P	Ø 4.2	11.5 mm	Ø 4.0	Ø 2.2
IA 4213 P	Ø 4.2	13 mm	Ø 4.0	Ø 2.2
IA 4215 P	Ø 4.2	15 mm	Ø 4.0	Ø 2.2

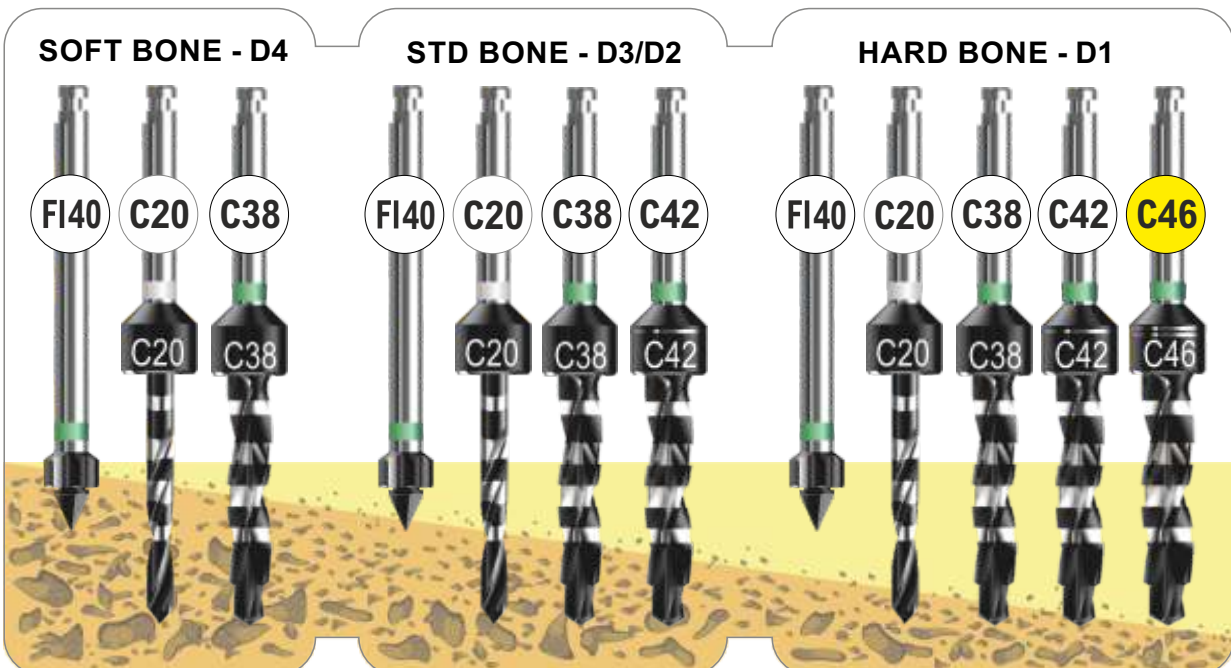


**REGULAR A - PLATINUM**  
conical connection 12° - full treatment

**IA 50-P**

ACTIVE BLADE SHAPE MOUNTERLESS

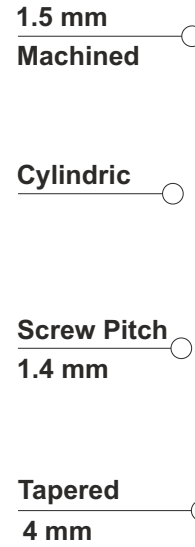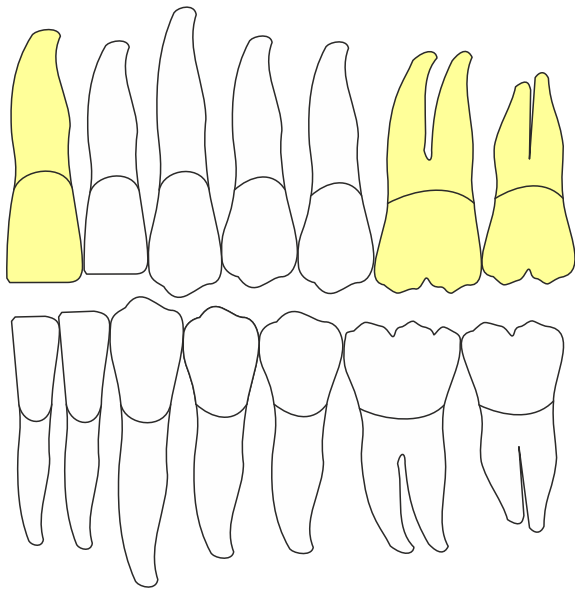


CODE	IMPLANT	LENGTH	NECK	APEX
IA 5008 P	Ø 5.0	8.5 mm	Ø 4.8	Ø 3.0
IA 5010 P	Ø 5.0	10 mm	Ø 4.8	Ø 3.0
IA 5011 P	Ø 5.0	11.5 mm	Ø 4.8	Ø 3.0
IA 5013 P	Ø 5.0	13 mm	Ø 4.8	Ø 3.0

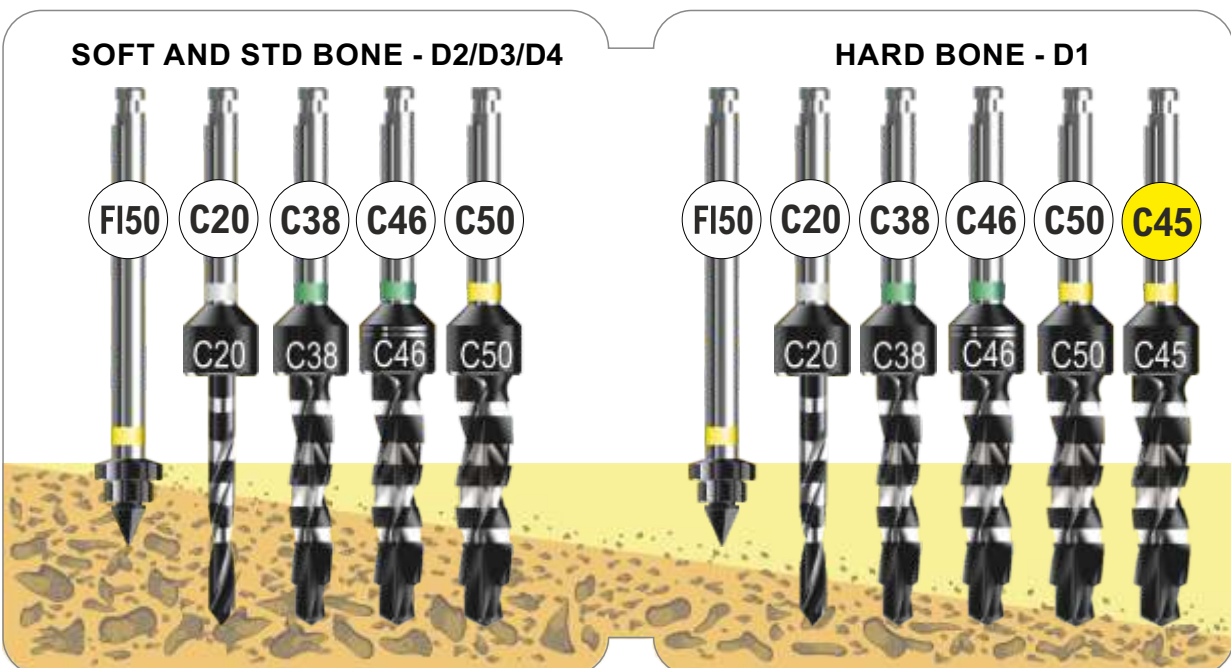


# CONICAL CONNECTION

## REGULAR PLATINUM

SPEEDY  
SHAPE

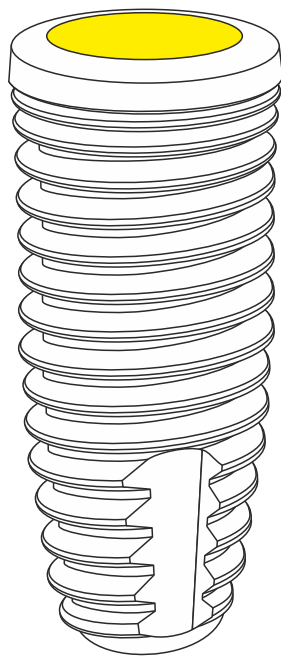

ES-P

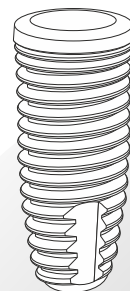


IMPIANTO  
**SENZA MOUNTER**  
MOUNTERLESS


# ES 42-P

REGULAR S - PLATINUM  
conical connection 12° - full treatment

## SPEEDY SHAPE MOUNTERLESS

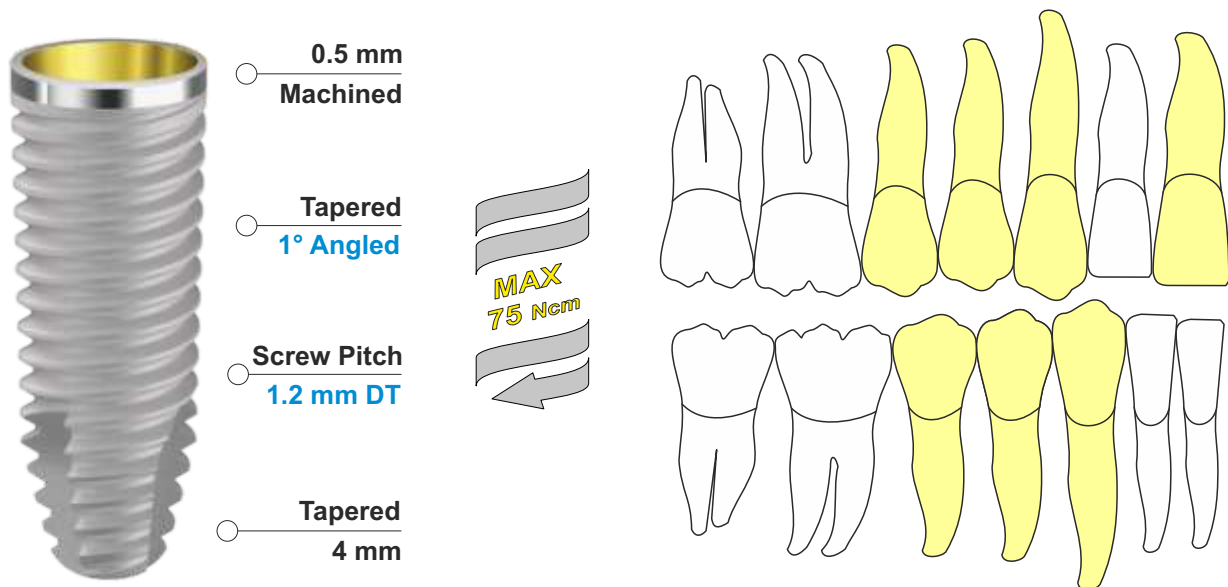


CODE	IMPLANT	LENGTH	NECK	APEX
ES 4208 P	Ø 4.2	8.5 mm	Ø 4.0	Ø 2.2
ES 4210 P	Ø 4.2	10 mm	Ø 4.0	Ø 2.2
ES 4211 P	Ø 4.2	11.5 mm	Ø 4.0	Ø 2.2
ES 4213 P	Ø 4.2	13 mm	Ø 4.0	Ø 2.2
ES 4215 P	Ø 4.2	15 mm	Ø 4.0	Ø 2.2

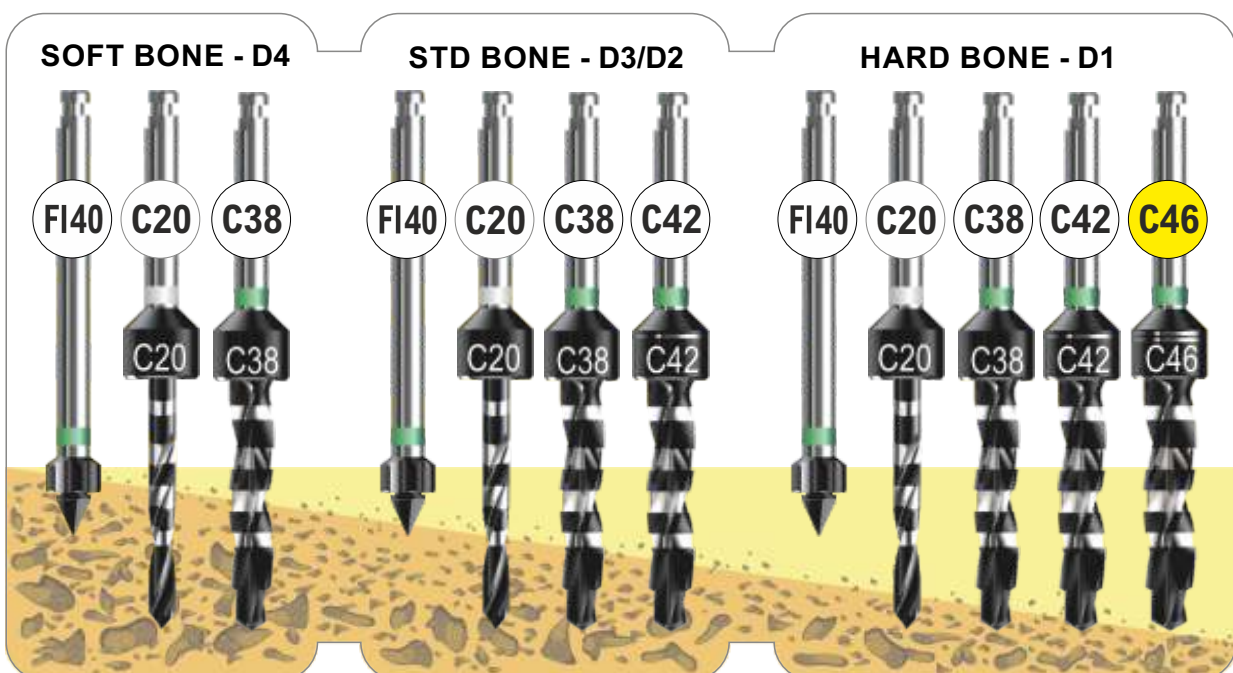


**REGULAR S - PLATINUM**  
conical connection 12° - full treatment

**ES 50-P**

**SPEEDY SHAPE MOUNTERLESS**

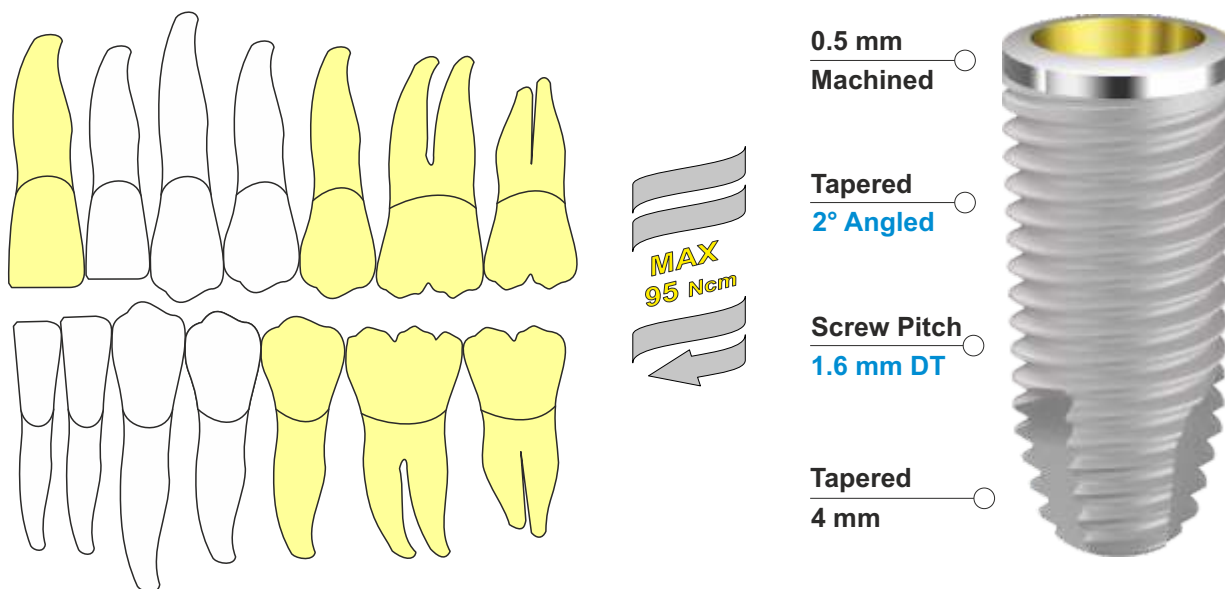

CODE	IMPLANT	LENGTH	NECK	APEX
ES 5008 P	Ø 5.0	8.5 mm	Ø 4.8	Ø 3.5
ES 5010 P	Ø 5.0	10 mm	Ø 4.8	Ø 3.5
ES 5011 P	Ø 5.0	11.5 mm	Ø 4.8	Ø 3.5
ES 5013 P	Ø 5.0	13 mm	Ø 4.8	Ø 3.5

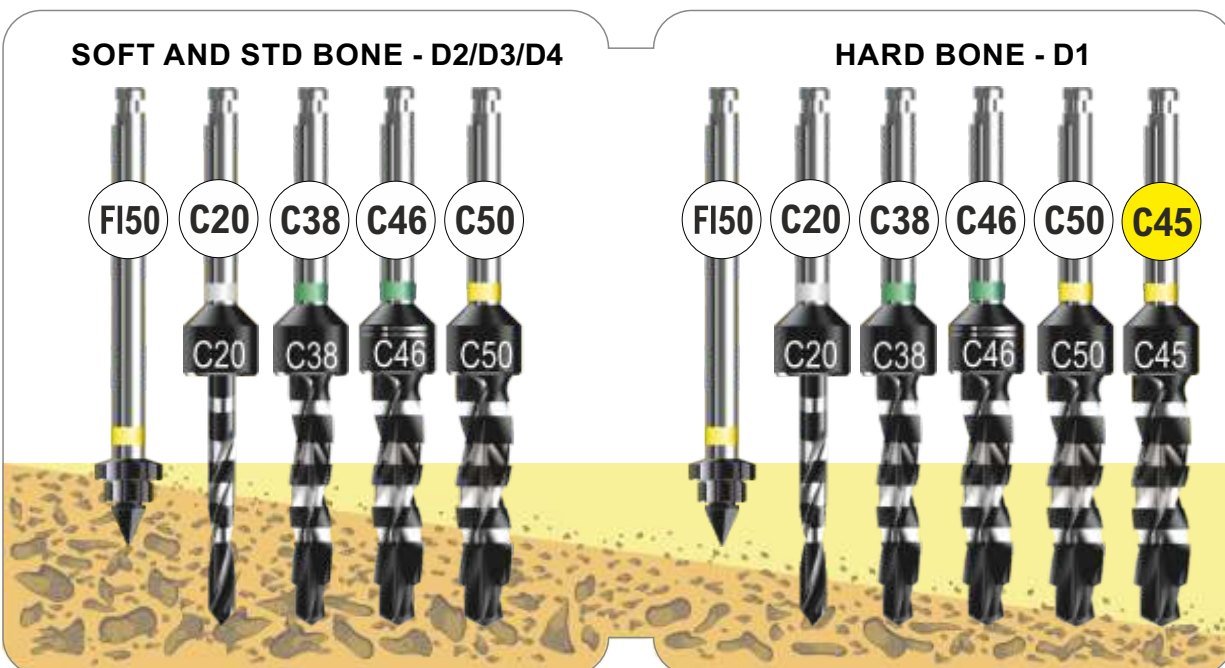

# CONICAL CONNECTION

REGULAR PLATINUM

REGULAR  
PROSTHETICS



# regular CCP prosthetics

20Ncm 



**Pilastro di Guarigione** - Titanio Gr. 5 - Anodizzato

**Healing Abutment** - Titanium Gr. 5 - Anodized

**IP 4HA3-P** H 3 mm - Regular Gingival Profile

**IP 4HA4-P** H 4 mm - Regular Gingival Profile

**IP 4HA5-P** H 5 mm - Regular Gingival Profile

**DMX 1/2** Standard Torx Driver



**Analogo per Laboratorio** - Titanio Gr. 5 - Anodizzato

**Laboratory Analog** - Titanium Gr. 5 - Anodized

**IP 4AL-P** H 12 mm - Universal Shape

32Ncm 



**Moncone UCLA Cobalto Cromo** - CoCr

**UCLA Abutment Cobalt Chrome** - CoCr

**IP 4CCA-P** Antirotation Hex - Regular Gingival Profile H1,5mm

**IP 4CCR-P** Rotating - Regular Gingival Profile H1,5mm

**SP VIT40** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMX 1/2** Standard Torx Driver

32Ncm 



**Moncone Titanio Dritto** - Titanio Gr. 5

**Straight Titanium Abutment** - Titanium Gr. 5

**IP 4ST1-P** 0° - Straight - Regular Gingival Profile H1.5mm

**IP 4ST3-P** 0° - Straight - Regular Gingival Profile H3.0mm

**IP 4ST4-P** 0° - Straight - Regular Gingival Profile H4.0mm

**SP VIT40** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMX 1/2** Standard Torx Driver

32Ncm 



**Moncone Titanio Preangolato 15°** - Titanio Gr. 5

**15° Angled Titanium Abutment** - Titanium Gr. 5

**IP 4AT151-P** 15° - Angled - Regular Gingival Profile H1.5mm

**IP 4AT153-P** 15° - Angled - Regular Gingival Profile H3.0mm

**IP 4AT154-P** 15° - Angled - Regular Gingival Profile H4.0mm

**SP VIT40** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMX 1/2** Standard Torx Driver

# regular CCP prosthetics

## Moncone Titanio Preangolato 25° - Titanio Gr. 5

25° Angled Titanium Abutment - Titanium Gr. 5

**IP 4AT251-P** 25° - Angled - Regular Gingival Profile H1.5mm

**IP 4AT253-P** 25° - Angled - Regular Gingival Profile H3.0mm

**IP 4AT254-P** 25° - Angled - Regular Gingival Profile H4.0mm

**SP VIT40** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMX 1/2** Standard Torx Driver



## Pilastro Temporaneo da Incollaggio - Ti Gr. 5

Antirotation Hex Temporary Abutment - Ti Gr. 5

**IP 4TA1-P** Antirotation Hex - Regular Gingival Profile H 1.5mm

**IP 4TA3-P** Antirotation Hex - Regular Gingival Profile H 3.0mm

**IP 4TR1-P** Rotating - Regular Gingival Profile H 1.5mm

**IP 4TR3-P** Rotating - Regular Gingival Profile H 3.0mm

**DMX 1/2** Standard Torx Driver



## Pilastro per Overdenture - Titanio Gr. 5 - PVD TiN

Overdenture Abutment - Titanium Gr. 5 - PVD TiN

**IP 4BA1-P** H 1 mm - Regular Gingival Profile - NORMO

**IP 4BA2-P** H 2 mm - Regular Gingival Profile - NORMO

**IP 4BA3-P** H 3 mm - Regular Gingival Profile - NORMO

**IP 4BA4-P** H 4 mm - Regular Gingival Profile - NORMO

**DMX 1/2** Standard Torx Driver



## Kit Pilastro Equator per Overdenture - Titanio Gr. 5 - PVD

Overdenture Equator Abutment Kit - Titanium Gr. 5 - PVD

**IP 4EQ1-P** H 1 mm - Regular Gingival Profile

**IP 4EQ2-P** H 2 mm - Regular Gingival Profile

**IP 4EQ3-P** H 3 mm - Regular Gingival Profile

**IP 4EQ5-P** H 5 mm - Regular Gingival Profile

**DM EQ** Squared Equator Driver



## Transfer per impronta Pick Up - Titanio Gr. 5

Pick Up Impression Coping - Titanium Gr. 5

**IP 4IA1-P** Regular Gingival Profile - H1.5mm

**IP 4IA3-P** Regular Gingival Profile - H3.0mm


**IP 4IA4-P** Regular Gingival Profile - H4.0mm

**SP VITL40** Vite di Ricambio - Spare Screw

**DMX 1/2** Standard Torx Driver



# toronto regular CCP prosthetics

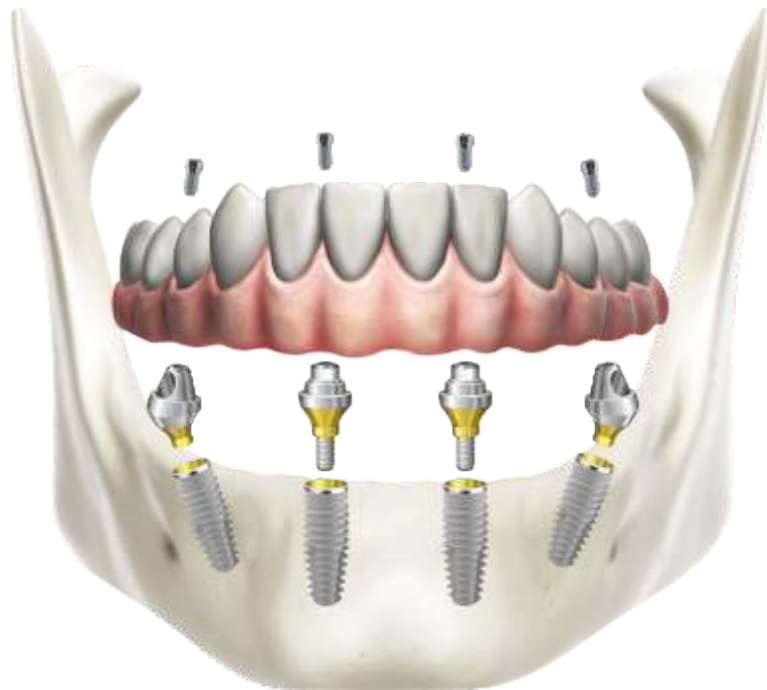

32Ncm



## Pilastro Toronto Diritto - Titanio Gr. 5

Toronto Straight Abutment - Titanium Gr. 5

- IP 4MS1-P H 1.5 mm - Standard Gingival Profile
- IP 4MS3-P H 3.0 mm - Standard Gingival Profile
- IP 4MS4-P H 4.0 mm - Standard Gingival Profile

DCDM

Standard Torx Driver

32Ncm



## Pilastro Toronto Angolato 17° - Titanio Gr. 5

Toronto 17° Angled Abutment - Titanium Gr. 5

- IP 4MA172-P 17° - H 2 mm - Standard Gingival Profile
- IP 4MA173-P 17° - H 3 mm - Standard Gingival Profile

IP 4VITMA-P Vite di Ricambio Toronto - Toronto Spare Screw

DMX 1/2

Standard Torx Driver

32Ncm



## Pilastro Toronto Angolato 30° - Titanio Gr. 5

Toronto 30° Angled Abutment - Titanium Gr. 5

- IP 4MA303-P 30° - H 3 mm - Standard Gingival Profile
- IP 4MA304-P 30° - H 4 mm - Standard Gingival Profile

IP 4VITMA-P Vite di Ricambio Toronto - Toronto Spare Screw

DMX 1/2


Standard Torx Driver

# toronto regular CCP prosthetics

## Pilastro Calcinabile Toronto & Pilastro di Guarigione

### Toronto Castable Abutment & Healing Abutment

- EP MC** Rotating Castable Abutment
- EP MHA** H 4 mm - Standard Gingival Profile Titanium Gr5
- EP MHA6** H 6 mm - Large Gingival Profile Titanium Gr5
- EP MV** Vite di Ricambio Toronto - Toronto Spare Screw
- DMX 1/2** Standard Torx Driver

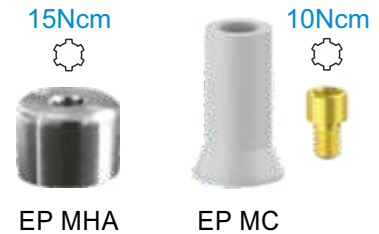

## Componenti Protesiche Toronto - Titanio Gr. 5

### Toronto Prosthetics - Titanium Gr. 5

- EP MI** Rotating - Standard Gingival Profile
- EP MAL2DS** Digital Toronto Analog - Analogo Digitale
- EP MT** Rotating Temporary - Incollaggio Passivo
- EP MTS** Rotating Welding Temporary - Saldatura Intraorale
- EP MVL** Vite di Ricambio Lunga - Long Spare Screw
- DMX 1/2** Standard Torx Driver



## Transfer Toronto & Link da Incollaggio - Titanio Gr. 5

### Toronto Scan Abutment & Link - Titanium Gr. 5

- EP MSA2 DS** Toronto Rotating Scan Abutment
- EP MT DS** Toronto Rotating - Bonding Technique Link
- EP MV** Vite di Ricambio Toronto - Toronto Spare Screw
- DMX 1/2** Standard Torx Driver

## Digital Solutions



## Componenti Digitali CCP - Titanio Gr. 5

### CCP Digital Components - Titanium Gr. 5


- ACT SB43K** Antirotational Scan Abutment
- ACT LKN43K** Antirotational Bonding Technique Link
- ACT LKR43K** Rotating Bonding Technique Link
- ACT AN3D43K** CAD Laboratory Analog
- ACT VP** Vite di Ricambio - Spare Screw
- DMX 1/2** Standard Torx Driver



# INSTRUMENTS & DRILLS

## IMPLANT TOOLS

### DRILLS

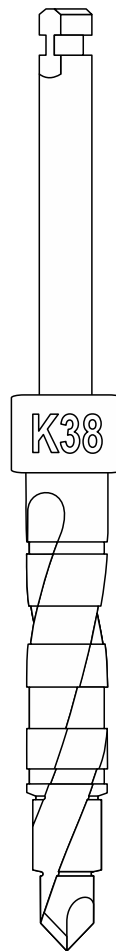

# S standard surgical drills

## FRESE HBM - Hard Bone Management



**07001604** Cortical Drill - Ø 1.6 mm - 11 mm



**04002104** Cortical Drill - Ø 2.1 mm - 11 mm



**FLS2313** Lance Drill - Ø 2.3 mm - 13 mm

## FIS- CORTICALS



**FIS 30** Cortical Drill - Ø 3.0 mm



**FIS 35** Cortical Drill - Ø 3.5 mm



**FIS 40** Cortical Drill - Ø 4.0 mm



**FIS 50** Cortical Drill - Ø 5.0 mm

## FCS - CYLINDRICALS



**FCS 20** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - Long 18 mm



**FCS 30** Cylindrical Drill - Ø 2.6 mm - Long 18 mm



**FCS 34** Cylindrical Drill - Ø 2.9 mm - Long 18 mm



**FCS 38** Cylindrical Drill - Ø 3.2 mm - Long 18 mm



**FCS 42** Cylindrical Drill - Ø 3.6 mm - Long 18 mm



**FCS 46** Cylindrical Drill - Ø 3.9 mm - Long 18 mm



**FCS 50** Cylindrical Drill - Ø 4.4 mm - Long 18 mm



**FCS 55** Cylindrical Drill - Ø 4.7 mm - Long 18 mm

# S standard surgical drills

## FKS - TAPERED

**FKS 30** Tapered Drill - Ø 2.4 mm - Long 18 mm



**FKS 34** Tapered Drill - Ø 2.9 mm - Long 18 mm



**FKS 38** Tapered Drill - Ø 3.25 mm - Long 18 mm



**FKS 42** Tapered Drill - Ø 3.5 mm - Long 18 mm



**FKS 46** Tapered Drill - Ø 3.85 mm - Long 18 mm



**FKS 50** Tapered Drill - Ø 4.35 mm - Long 18 mm



## FKS - EXTRALARGE

**FKS 60** Tapered Drill - Ø 5.0 mm - 15 mm



**FKS 80** Tapered Drill - Ø 7.0 mm - 15 mm



## MUCOTOMI - TISSUE PUNCHES

**ST M13** Manual Tissue Punche - Ø3.0mm

**ST M14** Manual Tissue Punche - Ø4.1mm

**ST M15** Manual Tissue Punche - Ø5.1mm

**ST M23** Contrangle Tissue Punche - Ø3.0mm

**ST M24** Contrangle Tissue Punche - Ø4.1mm

**ST M25** Contrangle Tissue Punche - Ø5.1mm



# calibrated surgical drills

## FCC 20 - CYLINDRICALS



**FCC 2007** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - Long 7 mm

**FCC 2008** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - Long 8,5 mm

**FCC 2010** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - Long 10 mm

**FCC 2011** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - Long 11,5 mm

**FCC 2013** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - Long 13 mm

## FKC 34 - TAPERED



**FKC 3407** Tapered Drill - Ø 2.9 mm - Long 7 mm

**FKC 3408** Tapered Drill - Ø 2.9 mm - Long 8,5 mm

**FKC 3410** Tapered Drill - Ø 2.9 mm - Long 10 mm

**FKC 3411** Tapered Drill - Ø 2.9 mm - Long 11,5 mm

**FKC 3413** Tapered Drill - Ø 2.9 mm - Long 13 mm

## FKC 38 - TAPERED



**FKC 3807** Tapered Drill - Ø 3.2 mm - Long 7 mm

**FKC 3808** Tapered Drill - Ø 3.2 mm - Long 8,5 mm

**FKC 3810** Tapered Drill - Ø 3.2 mm - Long 10 mm

**FKC 3811** Tapered Drill - Ø 3.2 mm - Long 11,5 mm

**FKC 3813** Tapered Drill - Ø 3.2 mm - Long 13 mm

# calibrated surgical drills

## FKC 42 - TAPERED

**FKC 4207** Tapered Drill - Ø 3.5 mm - Long 7 mm



**FKC 4208** Tapered Drill - Ø 3.5 mm - Long 8,5 mm



**FKC 4210** Tapered Drill - Ø 3.5 mm - Long 10 mm



**FKC 4211** Tapered Drill - Ø 3.5 mm - Long 11,5 mm



**FKC 4213** Tapered Drill - Ø 3.5 mm - Long 13 mm



## FKC 46 - TAPERED

**FKC 4607** Tapered Drill - Ø 3.9 mm - Long 7 mm



**FKC 4608** Tapered Drill - Ø 3.9 mm - Long 8,5 mm



**FKC 4610** Tapered Drill - Ø 3.9 mm - Long 10 mm



**FKC 4611** Tapered Drill - Ø 3.9 mm - Long 11,5 mm



**FKC 4613** Tapered Drill - Ø 3.9 mm - Long 13 mm



## FKC 50 - TAPERED

**FKC 5007** Tapered Drill - Ø 4.3 mm - Long 7 mm



**FKC 5008** Tapered Drill - Ø 4.3 mm - Long 8,5 mm



**FKC 5010** Tapered Drill - Ø 4.3 mm - Long 10 mm



**FKC 5011** Tapered Drill - Ø 4.3 mm - Long 11,5 mm



**FKC 5013** Tapered Drill - Ø 4.3 mm - Long 13 mm



# universal surgical drills

## FC - CYLINDRICALS



**FC 2013B** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - 13 mm

**FC 2018B** Cylindrical Drill - Ø 2.0 mm - 18 mm



**FC 2613B** Cylindrical Drill - Ø 2.6 mm - 13 mm

**FC 2618B** Cylindrical Drill - Ø 2.6 mm - 18 mm



**FC 3013B** Cylindrical Drill - Ø 3.0 mm - 13 mm

**FC 3018B** Cylindrical Drill - Ø 3.0 mm - 18 mm



**FC 3213B** Cylindrical Drill - Ø 3.2 mm - 13 mm

**FC 3218B** Cylindrical Drill - Ø 3.2 mm - 18 mm



**FC 3413B** Cylindrical Drill - Ø 3.4 mm - 13 mm

**FC 3418B** Cylindrical Drill - Ø 3.4 mm - 18 mm



**FC 3813B** Cylindrical Drill - Ø 3.8 mm - 13 mm

**FC 3818B** Cylindrical Drill - Ø 3.8 mm - 18 mm



**FC 4213B** Cylindrical Drill - Ø 4.2 mm - 13 mm

**FC 4218B** Cylindrical Drill - Ø 4.2 mm - 18 mm

## F - SPECIAL DRILLS



**FLS2313** Lance Drill - Ø 2.3 mm - L13 mm

**FLS2318** Lance Drill - Ø 2.3 mm - L18 mm



**FBP** Bone Profiler - Ø 5.0 mm - Int/Ext Hex  
(Velocità Max di rotazione antioraria 80 rpm)



**FT 3038** Trephine - Ø 3.0 mm / Ø 3.8 mm

**FT 4048** Trephine - Ø 4.0 mm / Ø 4.8 mm

**FT 5058** Trephine - Ø 5.0 mm / Ø 5.8 mm

**FT 6068** Trephine - Ø 6.0 mm / Ø 6.8 mm



**PF** Drill Extension - Prolunga per Frese



# guided surgical drills

SLEEVE



PEEK  
BOC415P

SLEEVE



TITANIUM  
BOC415T

SLEEVE



PIN  
BOC15



SMALL DRIVER  
Ø 4.15



SLEEVE



REDUCER  
BOCSR

SLEEVE



PEEK  
BOC55P

SLEEVE



TITANIUM  
BOC55T



LARGE DRIVER  
Ø 5.5


## FG - SPECIAL DRILLS

**FGR P15**

Pins Drill - Ø 1.5 mm

**FGR B55 L**

Bone Mill Drill - Ø 5.5 mm - ● Large

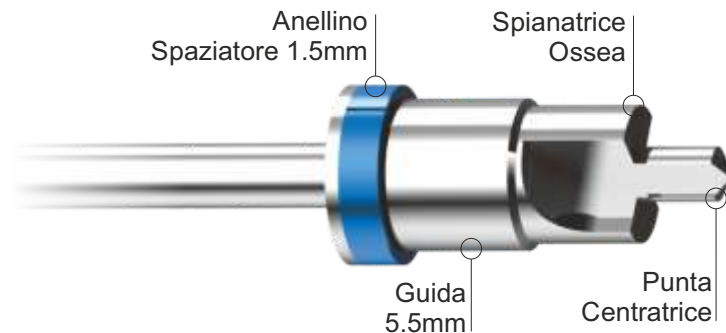

## FG M - MUCOTOMES

**FGR M41 S**


Mucotome Drill - Ø 4.1 mm - ● Small

**FGR M45 L**

Mucotome Drill - Ø 4.5 mm - ● Large

**FGR M55 L**

Mucotome Drill - Ø 5.3 mm - ● Large

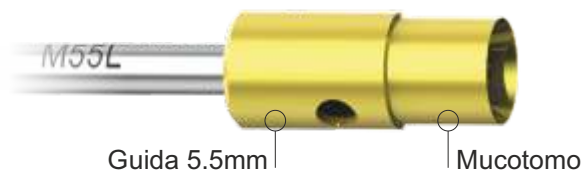

# guided surgical drills



## FG C - CORTICAL DRILLS



- FGR C35 S** Corticall Drill - Ø 3.5 mm - ● Small
- FGR C40 S** Corticall Drill - Ø 4.0 mm - ● Small
- FGR C35 L** Corticall Drill - Ø 3.5 mm - ● Large
- FGR C40 L** Corticall Drill - Ø 4.0 mm - ● Large
- FGR C50 L** Corticall Drill - Ø 5.0 mm - ● Large



## FG 20 S - FIRST DRILLS ● Small Driver



- FGR 2008 S** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 8,5 mm
- FGR 2010 S** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 10 mm
- FGR 2011 S** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 11,5 mm
- FGR 2013 S** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 13 mm
- FGR 2015 S** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 15 mm

## FG 20 L - FIRST DRILLS ● Large Driver



- FG 2008 L** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 8,5 mm
- FGR 2010 L** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 10 mm
- FGR 2011 L** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 11,5 mm
- FGR 2013 L** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 13 mm
- FGR 2015 L** First Drill - Ø 2.0 mm - Long 15 mm



# guided surgical drills

## FG 34 L - 3.4 IMPLANT DRILLS ● Small Driver

- FGR 3408 S** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 8,5 mm
- FGR 3410 S** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 10 mm
- FGR 3411 S** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 11,5 mm
- FGR 3413 S** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 13 mm
- FGR 3415 S** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 15 mm



## FG 34 L - 3.4 IMPLANT DRILLS ● Large Driver

- FGR 3408 L** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 8,5 mm
- FGR 3410 L** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 10 mm
- FGR 3411 L** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 11,5 mm
- FGR 3413 L** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 13 mm
- FGR 3415 L** 3.4 Implant Drill - Ø 2.9 mm - Long 15 mm



## FG 38 S - 3.8 IMPLANT DRILLS ● Small Driver

- FGR 3808 S** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 8,5 mm
- FGR 3810 S** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 10 mm
- FGR 3811 S** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 11,5 mm
- FGR 3813 S** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 13 mm
- FGR 3815 S** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 15 mm



## FG 38 L - 3.8 IMPLANT DRILLS ● Large Driver

- FGR 3808 L** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 8,5 mm
- FGR 3810 L** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 10 mm
- FGR 3811 L** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 11,5 mm
- FGR 3813 L** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 13 mm
- FGR 3815 L** 3.8 Implant Drill - Ø 3.3 mm - Long 15 mm



# guided surgical drills



## FG 42 S - 4.2 IMPLANT DRILLS ● Small Driver



<b>FGR 4208 S</b>	4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 8,5 mm
<b>FGR 4210 S</b>	4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 10 mm
<b>FGR 4211 S</b>	4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 11,5 mm
<b>FGR 4213 S</b>	4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 13 mm
<b>FGR 4215 S</b>	4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 15 mm

## FG 42 L - 4.2 IMPLANT DRILLS ● Large Driver



<b>FGR 4208 L</b>	4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 8,5 mm
<b>FGR 4210 L</b>	4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 10 mm
<b>FGR 4211 L</b>	4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 11,5 mm
<b>FGR 4213 L</b>	4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 13 mm
<b>FGR 4215 L</b>	4.2 Implant Drill - Ø 3.6 mm - Long 15 mm

## FG 46 L - 4.6 IMPLANT DRILLS ● Large Driver



<b>FGR 4608 L</b>	4.6 Implant Drill - Ø 3.9 mm - Long 8,5 mm
<b>FGR 4610 L</b>	4.6 Implant Drill - Ø 3.9 mm - Long 10 mm
<b>FGR 4611 L</b>	4.6 Implant Drill - Ø 3.9 mm - Long 11,5 mm
<b>FGR 4613 L</b>	4.6 Implant Drill - Ø 3.9 mm - Long 13 mm
<b>FGR 4615 L</b>	4.6 Implant Drill - Ø 3.9 mm - Long 15 mm

## FG 50 L - 5.0 IMPLANT DRILLS ● Large Driver



<b>FGR 5008 L</b>	5.0 Implant Drill - Ø 4.3 mm - Long 8,5 mm
<b>FGR 5010 L</b>	5.0 Implant Drill - Ø 4.3 mm - Long 10 mm
<b>FGR 5011 L</b>	5.0 Implant Drill - Ø 4.3 mm - Long 11,5 mm
<b>FGR 5013 L</b>	5.0 Implant Drill - Ø 4.3 mm - Long 13 mm



# guided surgical drills

## GUIDED MOUNTERS

- IP4MG 4S** Mounter Guidata - Internal Hex ● Small Drive
- IP4MG 4L** Mounter Guidata - Internal Hex ● Large Drive
  
- SP3MG 3S** Mounter Guidata - External Hex ● Small Drive
- SP4MG 4S** Mounter Guidata - External Hex ● Small Drive
- SP4MG 4L** Mounter Guidata - External Hex ● Large Drive
  
- IP3MG 3S-P** Mounter Guidata - Platinum CC ● Small Drive
- IP3MG 3L-P** Mounter Guidata - Platinum CC ● Large Drive
- IP4MG 4L-P** Mounter Guidata - Platinum CC ● Large Drive

Small Drive



Large Drive



Large Drive



Allineatori di Fase Esagonale  
Hexagonal Phase Aligners



Large Peek Sleeve



Small Peek Sleeve



Large Titanium Sleeve



Small Titanium Sleeve





# surgical kits



**BOX**  
Solo contenitore

**KIT 002**  
C-K-A Multilinea



**KIT FCK**  
Calibrate K



# surgical kits

<b>KIT 001MC</b>	Kit Chirurgico Monolinea Cilindriche - BOX02 + Frese + Accessori
<b>KIT 001MK</b>	Kit Chirurgico Monolinea Coniche - BOX02 + Frese + Accessori
<b>KIT 001PC</b>	Kit Chirurgico Monolinea Platinum Cilindriche - BOX02 + Frese + Accessori
<b>KIT 001PK</b>	Kit Chirurgico Monolinea Platinum Coniche - BOX02 + Frese + Accessori
<b>KIT 002</b>	Kit Chirurgico Standard - BOX + Frese + Accessori
<b>KIT 002P</b>	Kit Chirurgico Platinum Standard - BOX + Frese + Accessori
<b>KIT 004</b>	Kit Chirurgico Mini Implant - BOX 03 + CRND + Frese + Accessori
<b>KIT FCK</b>	Kit Chirurgico Calibrate K - BOX FCK + Frese + Accessori
<b>KIT 009</b>	Kit Chirurgico UNI-Q-MUA 2.0 - BOX 02 + Frese + Accessori
<b>KIT RPS01</b>	Kit Protesico REPLICA - BOX RP01 + 5 Drivers Corti
<b>KIT RPS02</b>	Kit Protesico REPLICA - BOX RP01 + 5 Drivers Corti + Cricchetto Dinamom.
<b>KIT RPL01</b>	Kit Protesico REPLICA - BOX RP01 + 5 Drivers Lunghi
<b>KIT RPL02</b>	Kit Protesico REPLICA - BOX RP01 + 5 Drivers Lunghi + Cricchetto Dinamom.
<b>BOX</b>	Box Chirurgico Implantologia Large - Solo contenitore
<b>BOX 02</b>	Box Chirurgico Implantologia Monolinea Medium - Solo contenitore
<b>BOX RP01</b>	Box Protesico REPLICA - Solo contenitore



**KIT 001**  
Monolinea



Kit Protesico  
REPLICA

# surgical kits


<b>KIT 005</b>	Kit Chirurgico Espansori - BOX 03 + 4 Espansori + Accessori
<b>KIT 006</b>	Kit Chirurgico Espansori Base - BOX 03 + 4 Espansori
<b>KIT PINK</b>	Kit Misuratori di Parallelismo - BOX P + 10 PIN
<b>KIT 007</b>	Kit Rimozione Impianti EXT - BOX 03 + 2 Estrattori + Accessori
<b>KIT RI</b>	Kit Rimozione Impianti REPLICA - BOX + 3 Estrattori + 4 Viti + Accessori
<b>KIT RV</b>	Kit Rimozione Viti Fratturate REPLICA - BOX + 2 Frese + Guida + Accessori
<b>KIT 012</b>	Kit REVO Chirurgia Guidata - BOX + 59 Frese + Accessori
<b>KIT 012L</b>	Kit REVO Chirurgia Guidata solo Frese Larghe - BOX + 36 Frese + Accessori
<b>BOX GR</b>	Box REVOLUTION Chirurgia Guidata - Solo contenitore
<b>KIT KN</b>	Kit K Narrow - Box + Frese + Accessori
<b>BPIF</b>	Base Svita Impianti - Base in Titanio per la Rimozione del Mount
<b>KBS</b>	Kit Boccole Spaziatrici - 8 Boccole 2 colori per tipo + Box Inox
<b>RBS</b>	Ricambi Boccole Spaziatrici - 8 Boccole 2 colori per tipo



**KBS** Kit Boccole Spaziatrici REVO



**BPIF** Base Svita Impianti

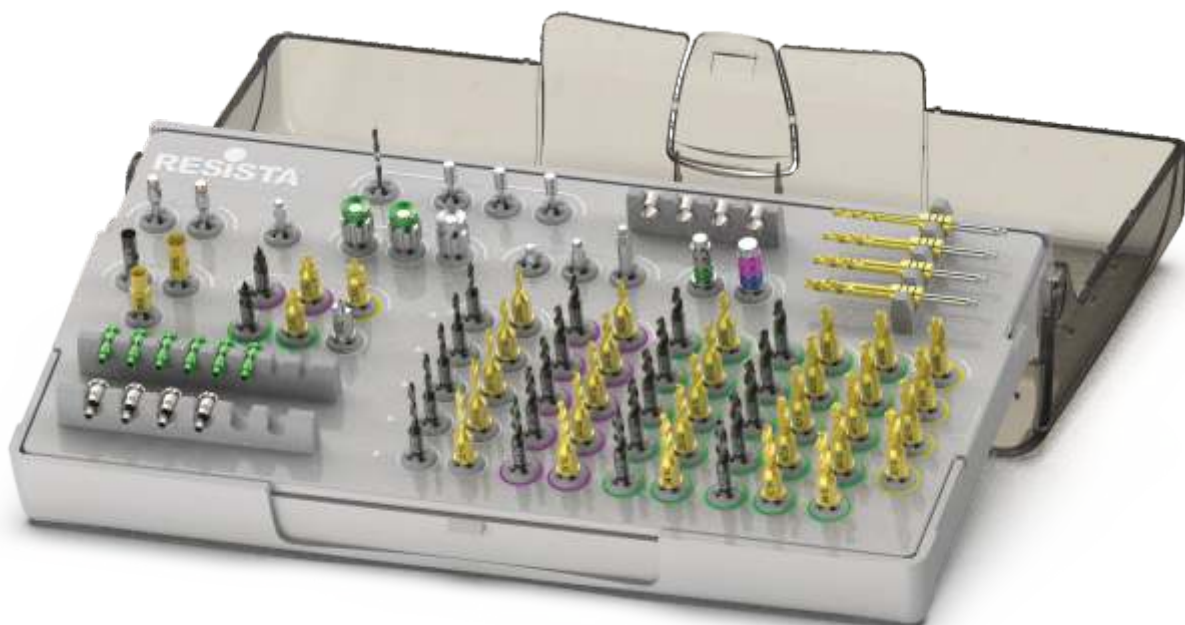

Guided Surgery REVO (Full Optional su Richiesta)

# computer guided surgery




# computer guided surgery

**MASCHERINA CHIRURGICA** - Mascherina on demand multi-impianti

**SURGICAL GUIDE** - Multi-implants on demand surgical guide

**DS PAK** Progetto + Mascherina + Modello + Boccole

**NB** - Supporto tecnico sul posto per i primi 3 interventi  
Kit Chirurgico in comodato d'uso per i primi 3 interventi

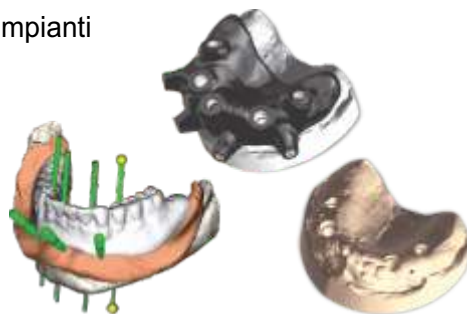


**MASCHERINA CHIRURGICA** - Mascherina on demand multi-impianti

**SURGICAL GUIDE** - Multi-implants on demand surgical guide

**DS PAK-M** Progetto + Mascherina + Boccole

**NB** - Supporto tecnico sul posto per i primi 3 interventi  
Kit Chirurgico in comodato d'uso per i primi 3 interventi

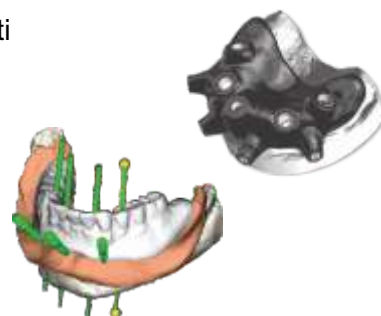

**MODELLO MASTER** - Modello stereolitografato, preforato per analoghi

**MASTER MODEL** - Pre-drilled stereolithographed model for analog

**DS MOD** Modello da stampa Digitale di precisione




**MASCHERINA CHIRURGICA** - Mascherina on demand multi-impianti

**SURGICAL GUIDE** - Multi-implants on demand surgical guide

**DS PAK 1** Mascherina 1 Impianto + Modello + Boccole

**DS PAK 4** Mascherina 4 Impianti + Modello + Boccole

**DS PAK 8** Mascherina 8 Impianti + Modello + Boccole

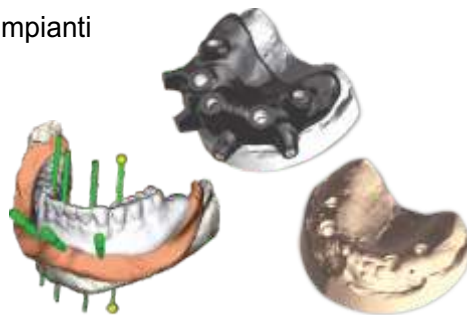

**PROTESI PROVVISORIA IMMEDIATA** - PMMA Stratificato Fresato + Armatura in Titanio Fresata

**IMMEDIATE TEMPORARY PROSTHESIS** - Drilled PMMA + Milled Titanium Framework

**DS PTD** Protesi Provvisoria Total Digital - PMMA + Armatura



# computer guided surgery

1

## **MODELLO PANORAMICO** - Ottenuto dalla ribasatura della protesi

Modello di precisione, integro, squadrato e rifinito

Materiale: Gesso di qualità Classe 4

Ribasare la protesi con materiale da impronta o prendere un'impronta di precisione se parzialmente edentulo



2

## **DUPLICATO DELLA PROTESI** - Realizzato sul modello panoramico

Copia conforme della protesi mobile senza sottosquadri vestibolari

Materiale: Resina ortodontica trasparente

Il dupliato è una copia di precisione di una protesi o di una ceratura diagnostica se il paziente è parzialmente edentulo



3

## **MARKER RADIOLOGICI** - Incollaggio delle palline di quarzo

6/8 palline, in posizioni sfalsate non lineari tra loro

Materiale: Sfere di quarzo delle sterilizzatrici a palline

Le palline vanno incollate con cianocrilato per metà del loro diametro nella resina ed il resto emergente, con posizioni sfalsate tra loro



4

## **TAC CONE BEAM** - Rimuovere ponti e corone metalliche se possibile

Paziente con duplicato in bocca e spaziatore intraorale tra le arcate

Dati DICOM standard inviati via mail in una cartella compressa

Il metallo di ponti e corone genera grandi quantità di scattering che altera l'interpretazione dei dati DICOM e la precisione



5

## **STL ANATOMIA e WAXUP PROTESICO** - 2/3 File STL

1 File STL Modello Gengivale/Dentale

1 File STL Modello + WaxUp Protesico (Duplicato della Protesi)

Inviare per e-mail in cartella compressa




6

## **CREAZIONE DEL CASO** - Ambiente virtuale per progettazione chirurgica


Trasformiamo il vostro materiale in un caso unico, già caricato nel

Programma di Pianificazione e ve lo condividiamo sul vostro Software

I file STL di modello, duplicato e/o scan-marker, li sovrapponiamo alla TAC (matching) all'interno del programma, per visualizzare ossa, tessuti molli e protesi

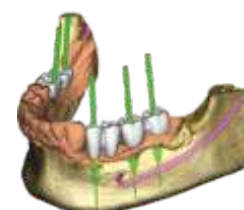



# computer guided surgery

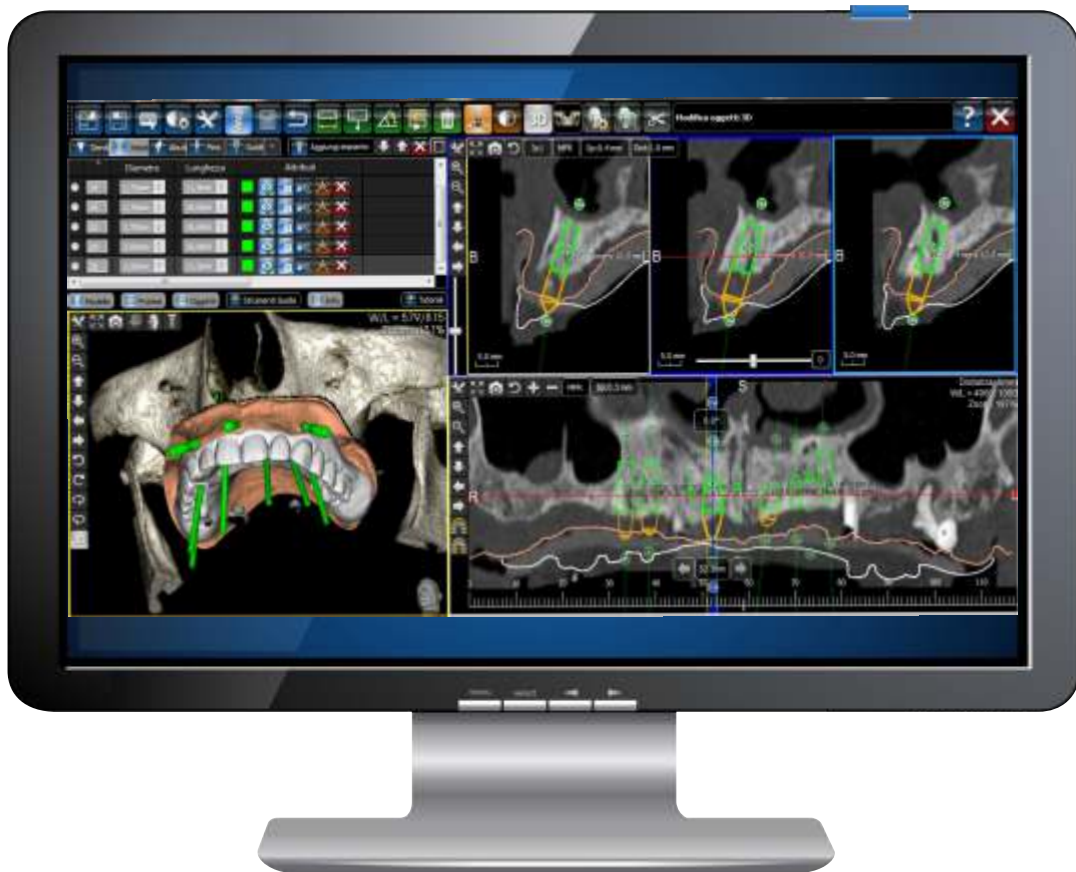

## CORSI DI FORMAZIONE TEORICO/PRATICI SU PC

Il futuro è digitale e la chirurgia computer guidata cammina al fianco della rivoluzione cad-cam che sta trasformando il nostro lavoro

impararne le basi, conoscerne le potenzialità, comprenderne i limiti per evitare errori e per migliorare il nostro quotidiano

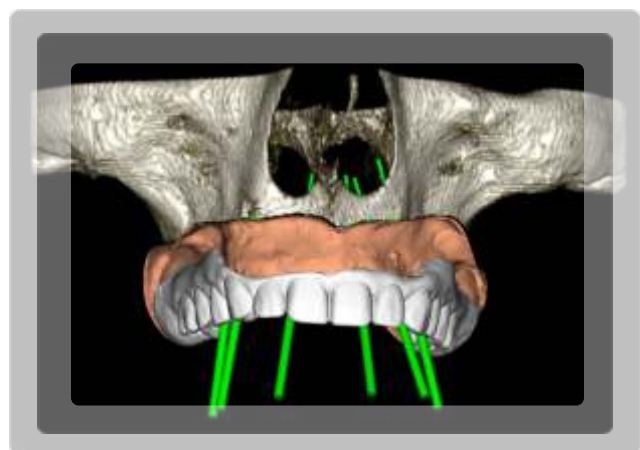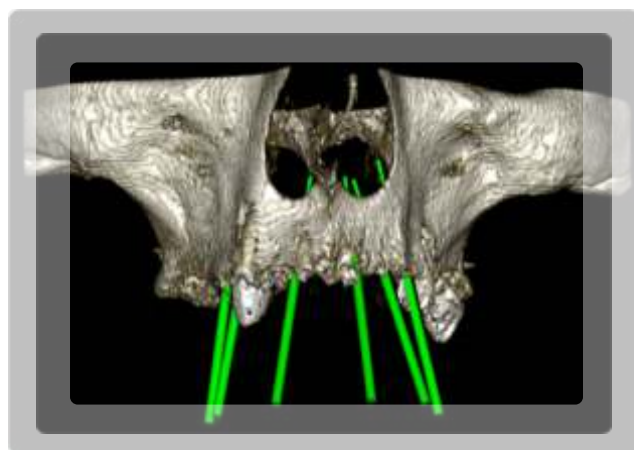

# OVERDENTURE & PROSTHETICS

## ATTACHMENTS



# overdenture



## Kit OT Equator Connessione Conica - Pilastro + Contenitore + Cappette

### Kit OT Equator Conical Connection - Abutment + Box + Caps

- IP3EQ1-P Kit OT Equator h1 mm Conical C. - NP ●
- IP3EQ2-P Kit OT Equator h2 mm Conical C. - NP ●
- IP3EQ3-P Kit OT Equator h3 mm Conical C. - NP ●
- IP3EQ4-P Kit OT Equator h4 mm Conical C. - NP ●
- IP3EQ5-P Kit OT Equator h5 mm Conical C. - NP ●
- IP3EQ6-P Kit OT Equator h6 mm Conical C. - NP ●




## Kit OT Equator Connessione Conica - Pilastro + Contenitore + Cappette

### Kit OT Equator Conical Connection - Abutment + Box + Caps


- IP4EQ1-P Kit OT Equator h1 mm Conical C. - RP ●
- IP4EQ2-P Kit OT Equator h2 mm Conical C. - RP ●
- IP4EQ3-P Kit OT Equator h3 mm Conical C. - RP ●
- IP4EQ4-P Kit OT Equator h4 mm Conical C. - RP ●
- IP4EQ5-P Kit OT Equator h5 mm Conical C. - RP ●
- IP4EQ6-P Kit OT Equator h6 mm Conical C. - RP ●



- TF Q1 Teflon Viola Forte
- TF Q2 Teflon Bianco Normale
- TF Q3 Teflon Rosa Morbida
- TF Q4 Teflon Giallo Extra
- TF Q5 Teflon Nero da Laboratorio

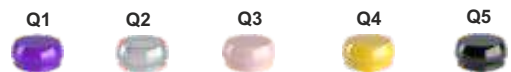

- SBOX EQ Smart Box - Autoparallelizzante Cont. + 5 Teflon

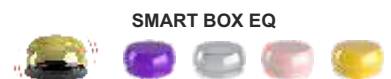

- COQ 01 Metal Box - Stainless Steel
- COQ 02 Metal Box - Titanium





## Femmine per Overdenture Normo - Ritenzioni Rhein

### Normo Overdenture Caps - Rhein Caps


<b>TF 10</b>	Teflon Bianca 1300 gr.
<b>TF 08</b>	Teflon Rosa 800 gr.
<b>TF 06</b>	Teflon Gialla 600 gr.
<b>TF 04</b>	Teflon Verde 400 gr.
<b>TF A</b>	Sottodimensionata - Teflon Arancione 350 gr.
<b>TF G</b>	Sottodimensionata - Teflon Gialla 500 gr.
<b>TF R</b>	Sottodimensionata - Teflon Rosa 900 gr.
<b>TF V</b>	Sottodimensionata - Teflon Verde 1300 gr.
<b>CO 01</b>	Metal Box - Stainless Steel
<b>CO 02</b>	Metal Box - Titanium



## Femmine per Overdenture Micro - Ritenzioni Rhein

### Micro Overdenture Caps - Rhein Caps

<b>TFM 10</b>	Teflon Bianca 1100 gr.
<b>TFM 08</b>	Teflon Rosa 800 gr.
<b>TFM 06</b>	Teflon Gialla 450 gr.
<b>TFM 04</b>	Teflon Verde 200 gr.
<b>TFM A</b>	Sottodimensionata - Teflon Arancione 200 gr.
<b>TFM V</b>	Sottodimensionata - Teflon Verde 1100 gr.
<b>COM 01</b>	Metal Box - Stainless Steel
<b>COM 02</b>	Metal Box - Titanium

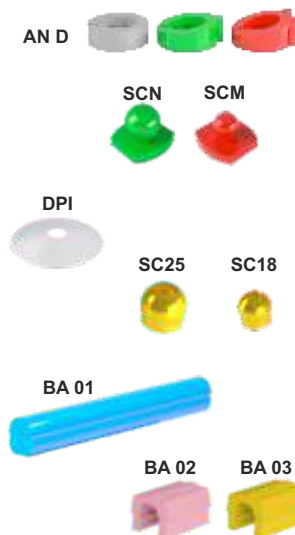

**AN D** Anelli Direzionali 0° - 7° - 14° - Conf 6pz.

**SC N** Sfera Calcinabile Normo Verde - 4pz.

**SC M** Sfera Calcinabile Micro Rossa - 4pz.

**DPI** Dischetto Protettivo per Incollaggio Trasparente - 10pz.

**SC 25** Sfera Cava da Incollaggio Normo - Per sfere usurate - 2pz.

**SC 18** Sfera Cava da Incollaggio Micro - Per sfere usurate - 2pz.

**BA 01** Barra tipo Dolder Calcinabile

**BA 02** Ritenzione in Teflon **Rosa** per Barra

**BA 03** Ritenzione in Teflon **Gialla** per Barra

**NP**



**Kit LOCATOR® Connessione Conica** - Pilastro + Contenitore + Caps

**Kit LOCATOR® Conical Connection** - Abutment + Box + Caps

**IP3LC1-P** Kit LOCATOR h1.5 mm - Conical C. - NP ●

**IP3LC2-P** Kit LOCATOR h2.5 mm - Conical C. - NP ●

**IP3LC5-P** Kit LOCATOR h5.0 mm - Conical C. - NP ●

**RP**



**Kit LOCATOR® Connessione Conica** - Pilastro + Contenitore + Caps

**Kit LOCATOR® Conical Connection** - Abutment + Box + Caps

**IP4LC1-P** Kit LOCATOR h1.5 mm - Conical C. - RP ●

**IP4LC2-P** Kit LOCATOR h2.5 mm - Conical C. - RP ●

**IP4LC5-P** Kit LOCATOR h5.0 mm - Conical C. - RP ●

# overdenture

## LOCATOR®

### Accessori e Ricambi LOCATOR®

#### LOCATOR® Accessories and Spare Parts

W2-TSLC Transfer Ti + Cappetta Nera (per laboratorio)



W2-COLC1 Contenitore Ti + Cappetta Nera (per laboratorio)



W2-NBOXLC Kit Cappette + Contenitore Ti



W2-TFLC50 Cappetta Ritentiva Trasparente - 2268 g 4 pz.



W2-TFLC30 Cappetta Ritentiva Rosa - 1361 g 4 pz.



W2-TFLC15 Cappetta Ritentiva Blu - 680 g 4 pz.



W2-ALLC Analogo in Titanio



W2-TFLCD40 Cappetta Ritentiva Verde - 1814 g 4 pz.



W2-TFLCD20 Cappetta ritentiva Arancione - 907 g 4 pz.



W2-TFLCD15 Cappetta ritentiva Rossa - 680 g 4 pz.



W2-DMLC Avvitatore manuale da Cricchetto (attacco Straumann®)



W2-DCLC Avvitatore da Contrangolo




W2-IELC Inseritore / Estrattore Cappette



# INSTRUMENTS & TOOLS

## IMPLANT TOOLS

### DRIVERS

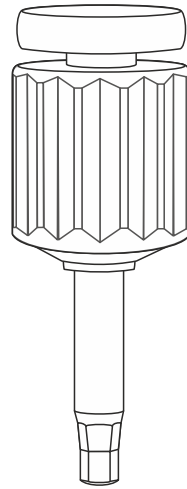

# instruments and tools

## CACCIAVITI MANUALI - MANUAL SCREW DRIVERS



**DM 01** Hexagonal 1.27 - Short - 12mm



**DM 02** Hexagonal 1.27 - Medium - 17mm

**DM 03** Hexagonal 1.27 - Long - 27mm



**DMX 01** Torx - Short - 15mm

**DMX 02** Torx - Long - 20mm



**DMRP120S** Hexagonal 1.20 - Short

**DMRP120L** Hexagonal 1.20 - Long



**DM T6DS** T6 Angled Torx Driver - 15mm

**DMEQ** Equator Squared - Short - 15mm

## CACCIAVITI DA CONTRANGOLO - CONTRA-ANGLE SCREW DRIVERS



**DC 01** Hexagonal 1.27 - Short - 15mm



**DC 02** Hexagonal 1.27 - Medium - 20mm



**DC 03** Hexagonal 1.27 - Long - 30mm



**ACDRCA** Hexagonal 1.20

**DC T6DS** T6 Angled Torx Driver - 20mm



**DCEQ** Equator Squared - Medium - 20mm

**DCX 01** Torx - Short - 15mm

**DCX 02** Torx - Long - 20mm

# instruments and tools

## CACCIAVITI DA CRICCHETTO - TORQUE CONTROLLER DRIVERS

**DCD 01** Hexagonal 1.27 - Short - 15mm

**DCD 02** Hexagonal 1.27 - Medium - 20mm

**DCD 03** Hexagonal 1.27 - Long - 30mm

**DCDX 01** Torx - Short - 15mm

**DCDX 02** Torx - Long - 20mm

**DCDM** Hexagonal - Monconi Toronto Diritti



## AVVITATORI MANUALI - FINGER MANUAL DEVICE

**DGM** Digitale Manuale - Manual Implant Driver



**DKX** Avvitatore Manuale per RA - RA Manual Driver



**UNADCRCAES35** Adattatore CRD2 da Es. 3,5 a RA  
CRD2 Adapter from Hex 3,5 to RA



[NB Controllare compatibilità vecchio e nuovo ed in alternativa catalogo REPLICA](#)

# instruments and tools

## AVVITATORI DA CONTRANGOLO - CONTRA-ANGLE IMPLANT DRIVERS

P



- AC P3S** Short - Conical Grip Driver **Platinum**
- AC P3M** Medium - Conical Grip Driver **Platinum**
- AC P3L** Long - Conical Grip Driver **Platinum**



- AC P4S** Short - Conical Grip Driver **Platinum**
- AC P4M** Medium - Conical Grip Driver **Platinum**
- AC P4L** Long - Conical Grip Driver **Platinum**

## PROLUNGHE DA CRICCHETTO - RATCHET IMPLANT DRIVERS

P



- PC P3S** Short - Conical Grip Driver **Platinum**
- PC P3M** Medium - Conical Grip Driver **Platinum**
- PC P3L** Long - Conical Grip Driver **Platinum**






- PC P4S** Short - Conical Grip Driver **Platinum**
- PC P4M** Medium - Conical Grip Driver **Platinum**
- PC P4L** Long - Conical Grip Driver **Platinum**


# instruments and tools

**Accessori per Applicazione Manuale**  
**Accessories for Manual Application**

**CD LAB** Chiave Digitale da Laboratorio Es. 3,5  
**ALI** Aiuto da Laboratorio Esagono Interno  
**ALE** Aiuto da Laboratorio Esagono Esterno


**UNADCR CAES35**  Adattatore da Es. 3,5 a RA

**ALI**  **ALE** 




Supporto da Laboratorio per la lavorazione dei Monconi

**0°**    **17°**    **32°**




**PIN K**




**Perni di Parallelismo - Titanio Gr. 5**  
**Paralleling Pins - Titanium Gr. 5**

**PIN** Double diameter - S 1.8mm / L 3mm - 0°  
**PIN17** Double diameter - S 1.8mm / L 3mm - 17°  
**PIN32** Double diameter - S 1.8mm / L 3mm - 32°

**PIN K** Kit Misuratori di Parallelismo Calibrati (10 PIN + BOX)

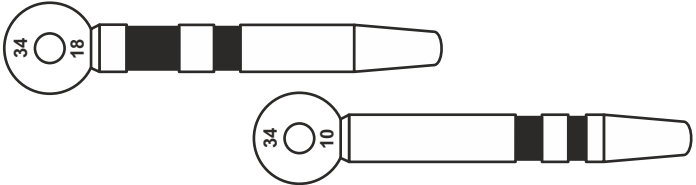


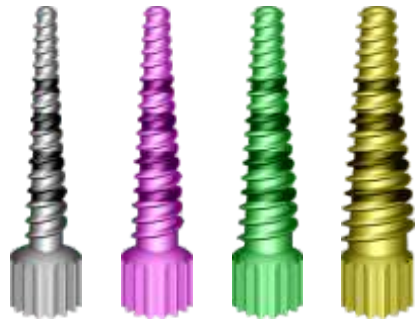

<b>A 1.3</b>	<b>A 1.6</b>	<b>A 1.9</b>	<b>A 2.4</b>
<b>B 2.1</b>	<b>B 2.8</b>	<b>B 3.5</b>	<b>B 4.3</b>
<b>C 2.4</b>	<b>C 3.1</b>	<b>C 3.8</b>	<b>C 4.6</b>

**Osseo Espansori e Compattatori - Titanio Gr. 5**  
**Bone Expanders and Compactors - Titanium Gr. 5**

**EXP** 4 Progressive diameters  
**KIT 005** Expander Surgical Kit

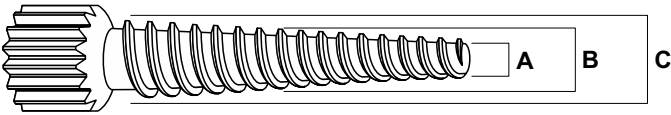

# instruments and tools

## Avvitatori Manuali - Acciaio Inox

Manual Driver - Stainless Steel



**CRND** Cricchetto non Dinamometrico - No Torque Control Ratchet



**CRD2** Cricchetto Dinamometrico 10/70 Ncm - Torque Control

CRD2-G



**CRD2-G** Ghiera Cricchetto CRD2 con Attacco PC - CRD2 Ratchet Wheel with PC Connection



**CRDP2** Cricchetto Dinamometrico Protesico 10/70 Ncm - Torque Control



**CDL** Avvitatore Diritto Manuale - Long Manual Driver

## Sonde e Misuratori - Acciaio Inox

Probes and Meters - Stainless Steel

**ST PRO SL1** Sonda Compattatore Doppia - Sinus Lift System



**SOM** Sonda Chirurgica in Titanio  
Titanium Surgical Probe

# mini sinus lift

Frese Taglienti 120°



## PRO Sinus Lift - Mini Rialzo del Seno per via Crestale

### PRO Sinus Lift - Mini Sinus Lift with Crestal Approach

**PRO SL Kit** Kit Completo Box + Frese + Stop + Accessori

- FC 20** Fresa ● Tagliente 120° - Ø 2.0
- FC 2026** Fresa ● Tagliente 120° - Ø 2.0/2.6
- FC 2531** Fresa ● Tagliente 120° - Ø 2.5/3.1
- FC 31P** Fresa ● Atraumatica 180° - Ø 3.1
- FC 31PTX** Fresa ● Atraumatica TaglioX 180° - Ø 3.1
- FC 31R** Fresa ● Raggiata Atraumatica - Ø 3.1
- FC 3136R** Fresa ● Raggiata Atraumatica - Ø 3.1/3.6

- KIT ST** 6 Titanium Drill Stoppers  
(6.0/7.0/8.5/10/11.5/13)
- STP KIT** 11 Titanium Drill Stoppers  
(1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.5/10/11.5/13)
- ST** Titanium Drill Stopper 1 pz. (Es. ST1, ST2, ST3)



Frese Atraumatiche (Max 100 rpm)



Frese Raggiate (Max 80 rpm)



# instruments and surgery


## IMPIANTI FRATTURATI

### UNIVERSAL IMPLANT EXTRACTOR

IMPIANTO  
FRATTURATO



IMPIANTO  
SOSTITUITO

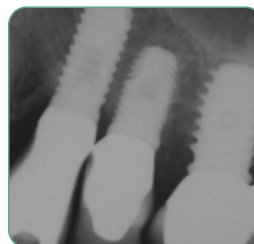

RIMOZIONE IMPIANTO IN  
AVVITAMENTO ANTIORARIO

SOSTITUZIONE IMMEDIATA  
CON NUOVO IMPIANTO

RIVESTIMENTO IN DLC  
Durezza e Minore Attirito

CONICITÀ PROGRESSIVA  
Incrementale

FILETTO 3 PRINCIPI  
120Ncm

ACCIAIO EXTRADURO  
68 Rockwell



**EXT** Implant Extractor - 1 pcs.


**KIT 007** Implant Extractor Kit - 2 Extractors + 1 Box + CRND

## Siringhe per Anestesia - Inox

Anesthesia Syringes - Stainless Steel



PERIPEN

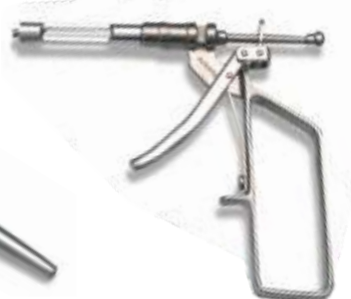

PERIPRESS



**22** PERIPRESS - Siringa Inox 1.8cc - Set 2 Portafiala

**32** PERIPRESS - Siringa Standard 1.8cc - Set 2 Portafiala

**118** PERIPEN - Siringa Inox 1.8cc - Set 2 Portafiala AM/EU



**Ing. C. A. Issoglio & C. S.r.l.**  
Via F.lli Di Dio, 68 - 28887 Omegna (VB) - ITALIA  
Tel. +39.0323.828.004 - Fax +39.0323.828.914  
[www.resista.it](http://www.resista.it) - [info@resista.it](mailto:info@resista.it)

REV 03 - 31/03/2023